


## Gemalto GCR5500-D mit PsyPrax


Installieren Sie zunächst das GCR5500 über die im Lieferumfang enthaltene Treiber CD. In der Systemsteuerung wird Ihnen anschließend der aktivierte COM-Port angezeigt. Öffnen Sie dazu Die Systemsteuerung auf Ihrem Rechner:




Wählen Sie den Unterordner „System“ mit Doppelklick:

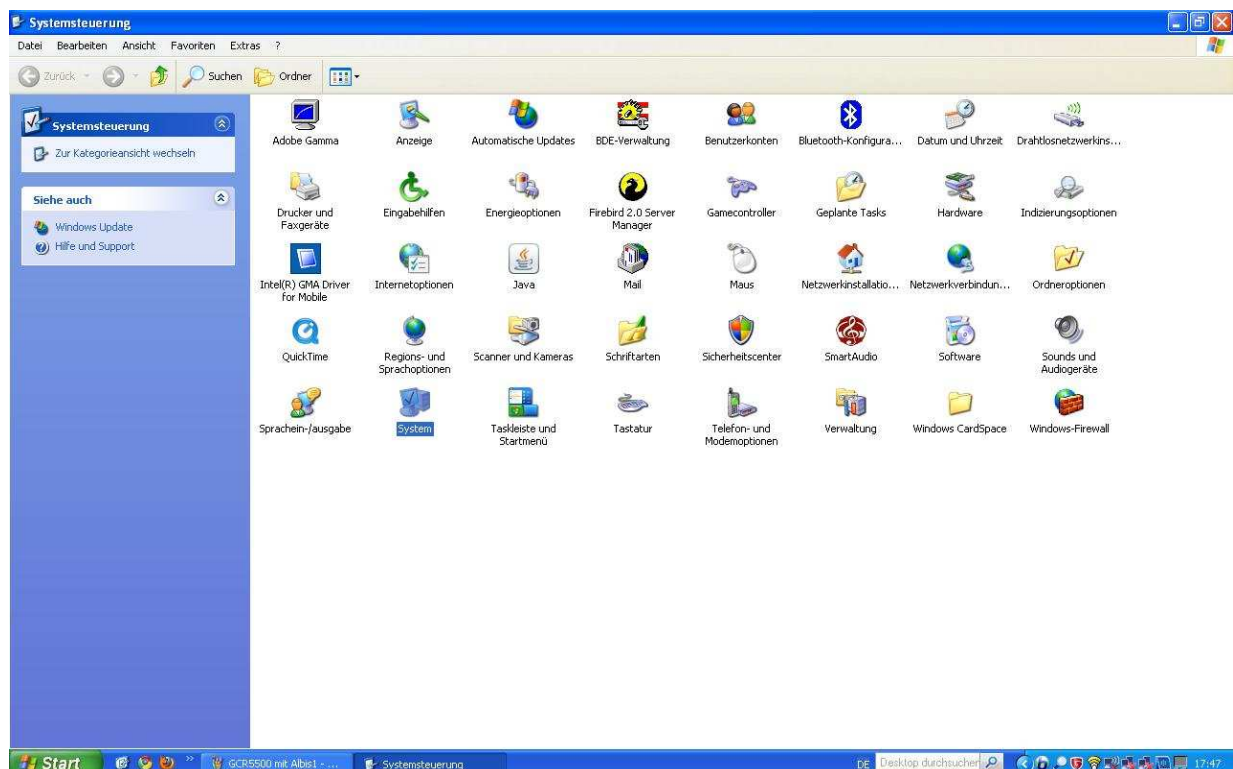


Es öffnet sich das Fenster „Systemeigenschaften“. Gehen Sie hier auf den Reiter „Hardware“ und Klicken Sie auf die Schaltfläche **Geräte-Manager**.

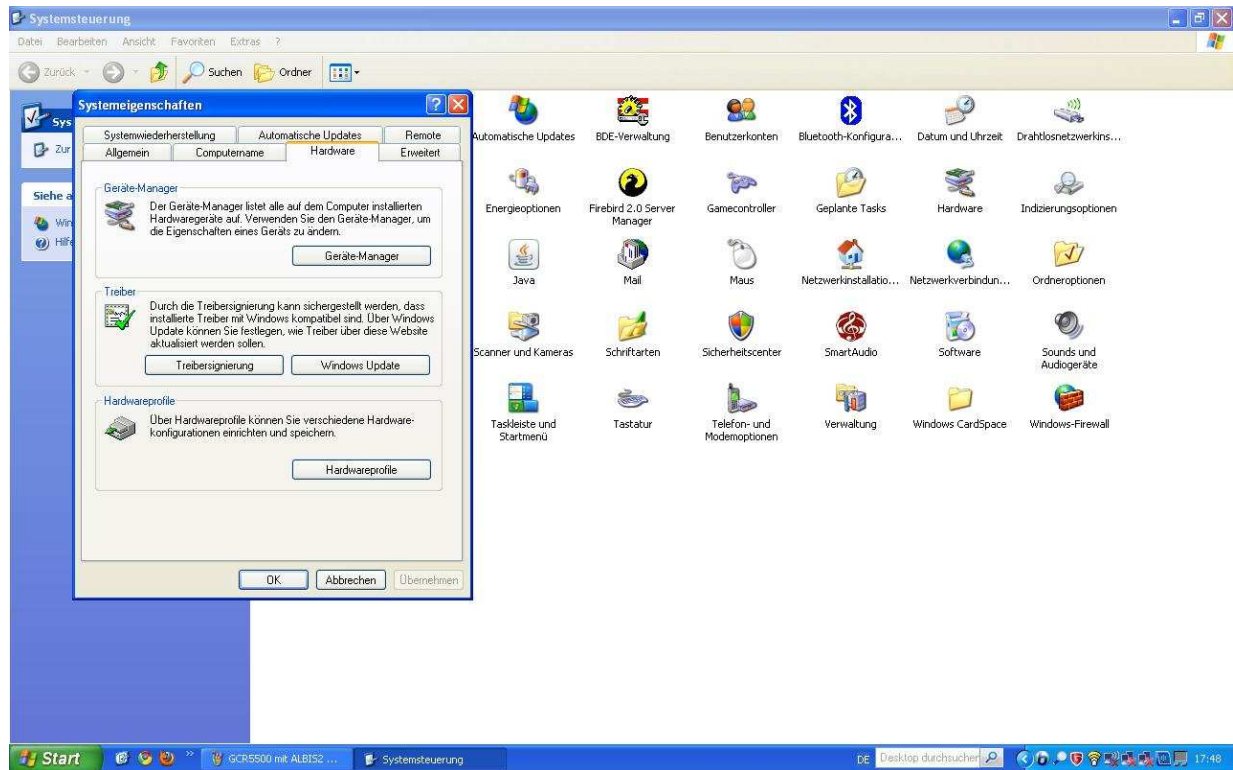


Klicken Sie auf „Anschlüsse COM und LPT“. Hier wird Ihnen das GCR500-D angezeigt mit der aktiviertenCOM-Schnittstelle (hier COM 2 )

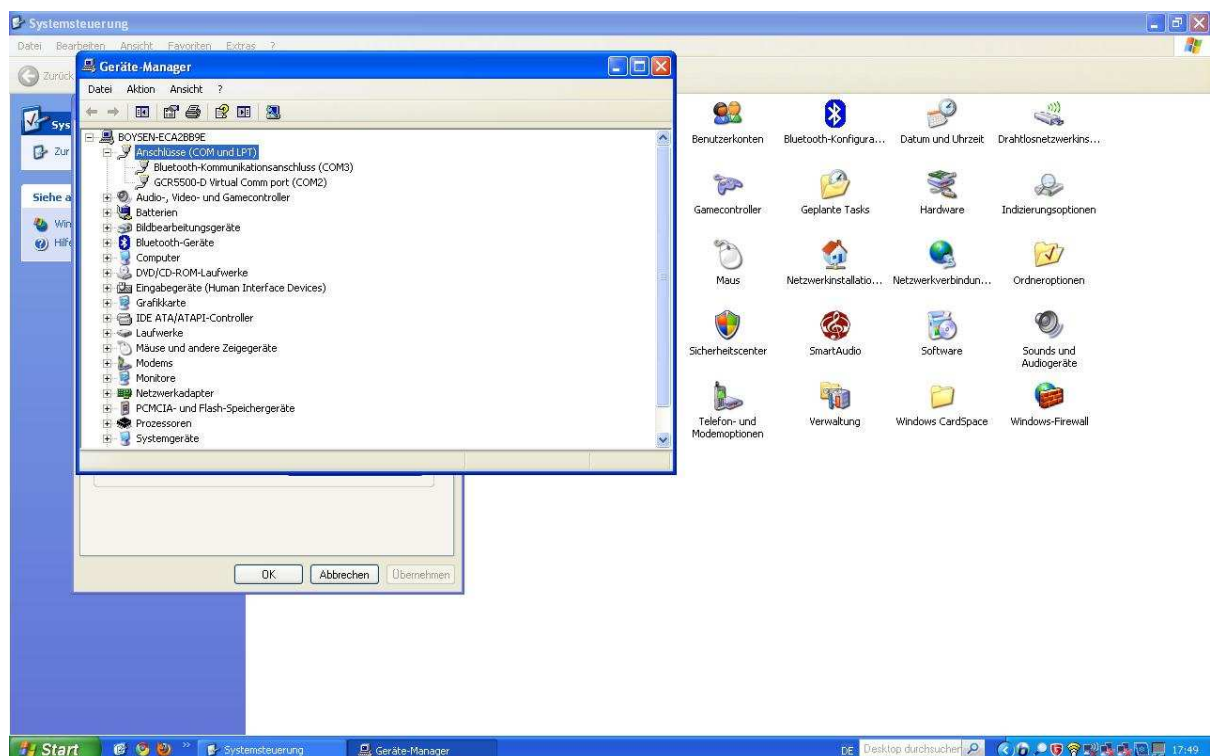


Öffnen Sie nun Ihr Praxisprogramm PsyPrax und wählen Sie im Register **Datei** „Konfigurieren“:

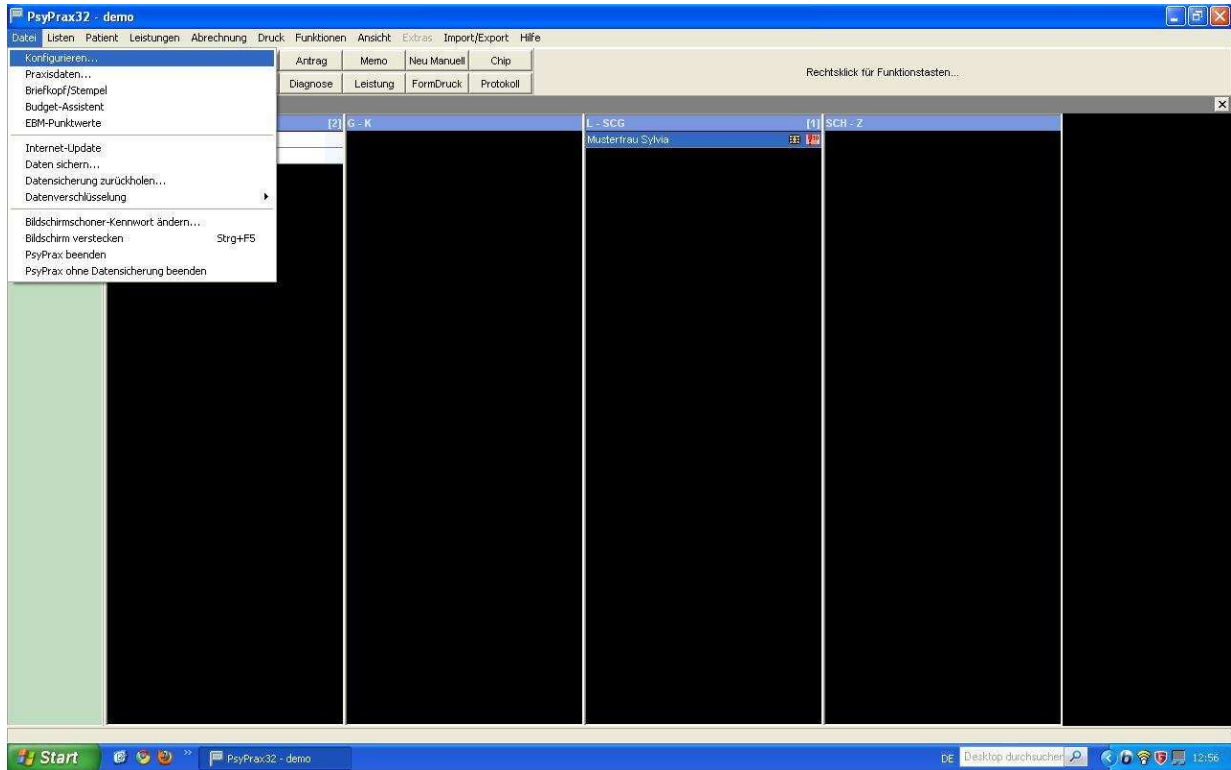


Öffnen Sie die Geräteübersicht bei Chipkartenleser, indem Sie auf den Pfeil klicken und markieren Sie das **Gemalto GCR5500**:

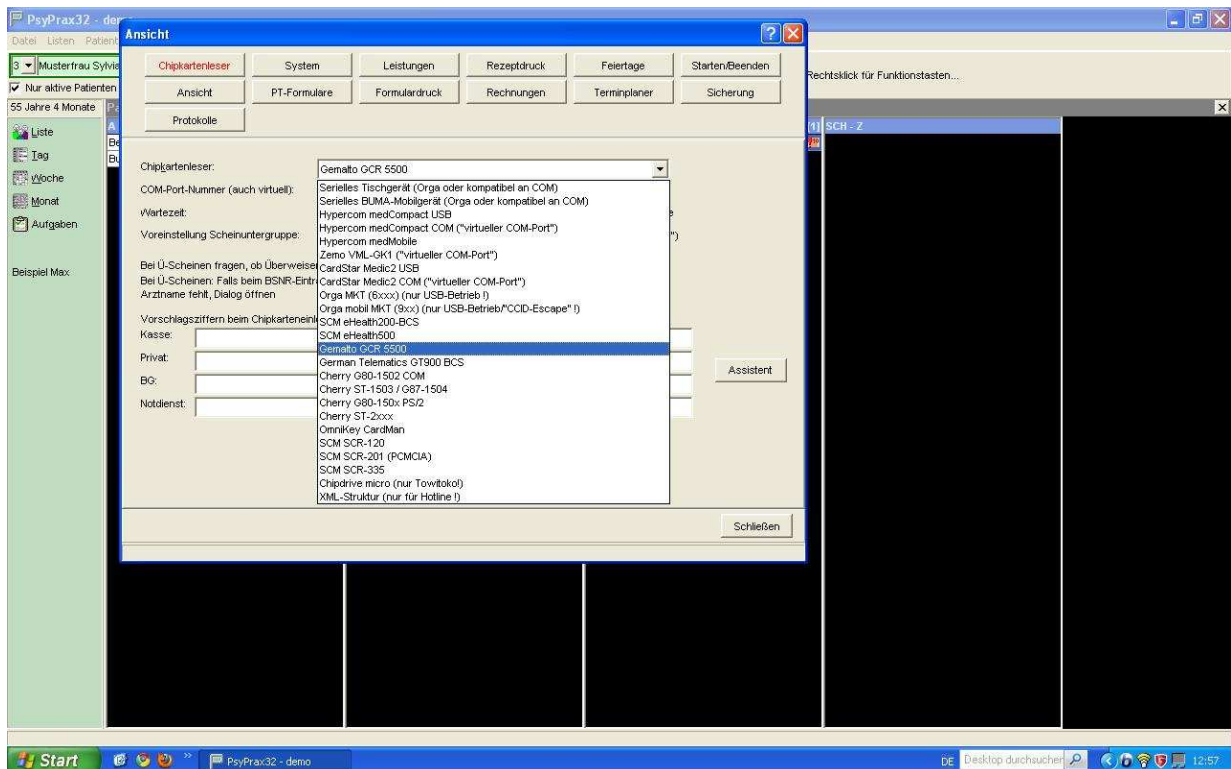


Stellen Sie die COM-Port Nummer ein, die Ihnen in der Systemsteuerung angezeigt wurde, in Unserem Beispiel also die 2:

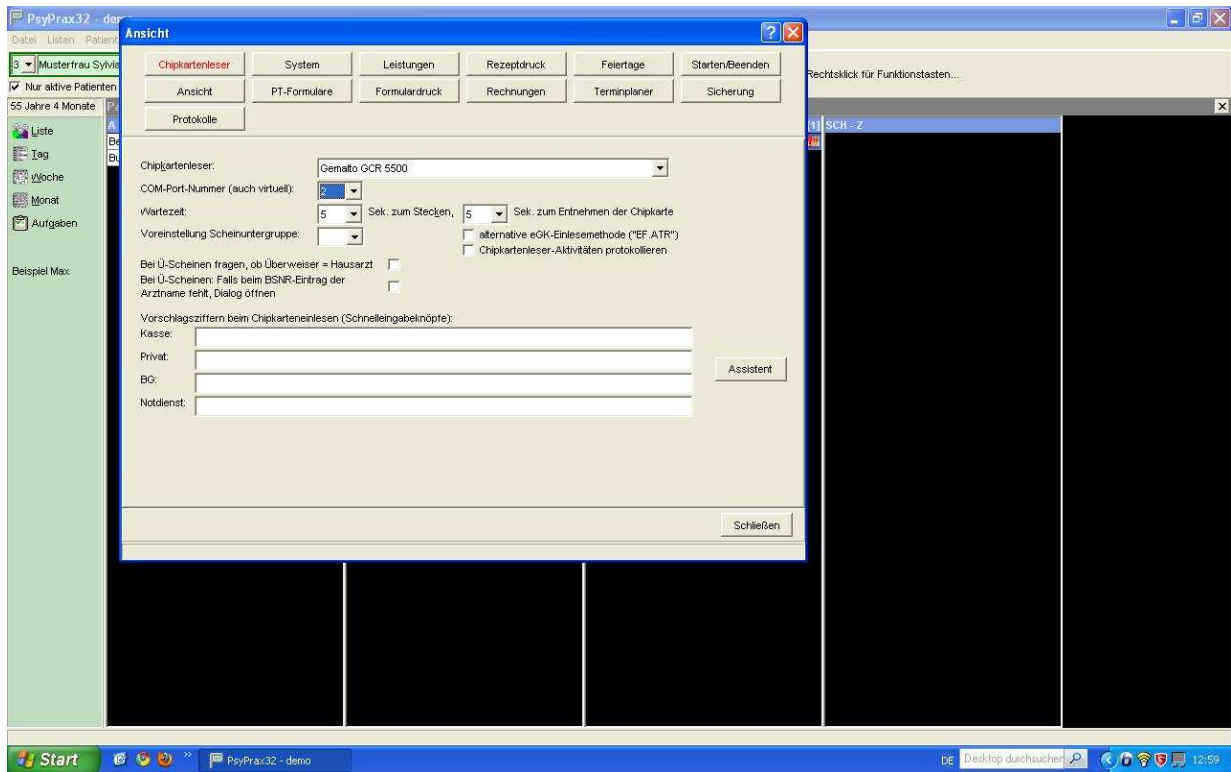

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Chip“ um eine Versichertenkarte einzulesen. Auf dem Bildschirm erfolgt die Aufforderung **Bitte Karte stecken!**

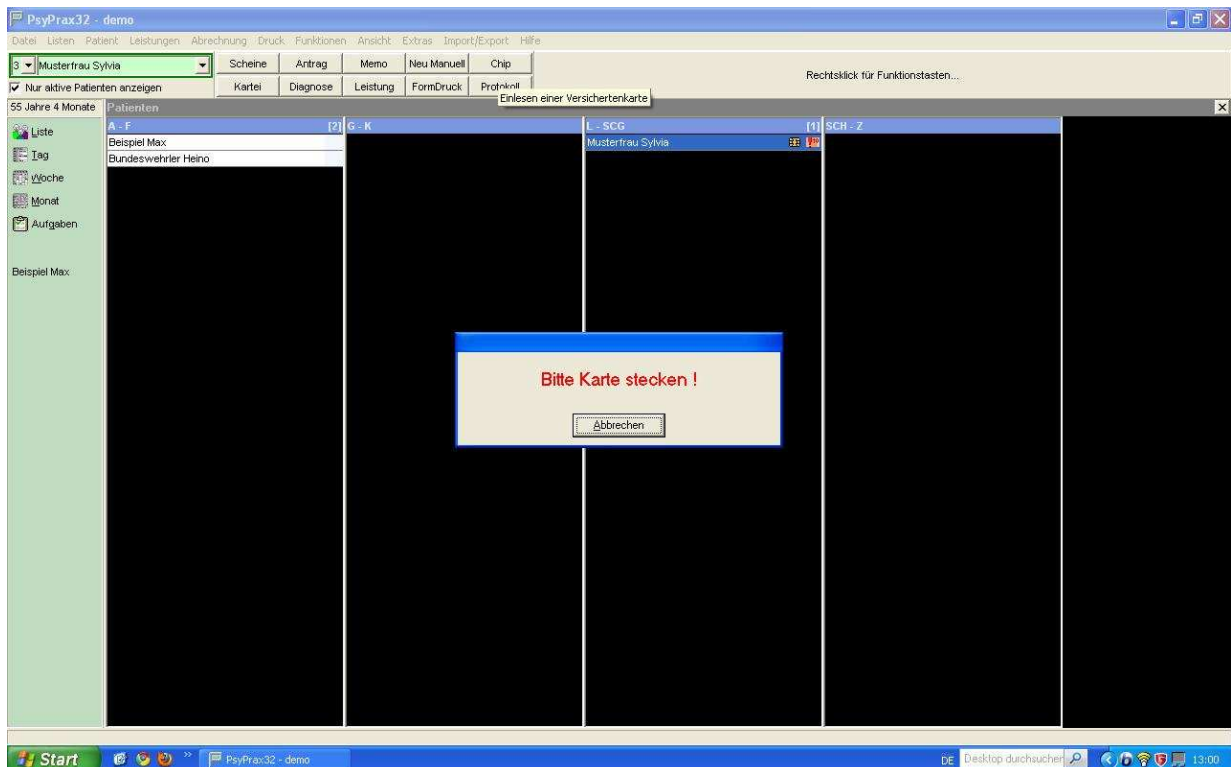

Führen Sie eine Versicherungskarte in den Kartenslot oberhalb des Displays des GCR5500-D. Auf dem GCR5500 erscheint ebenfalls die Aufforderung „Bitte Karte einführen“. PsyPrax meldet nun **Karte gelesen-Bitte ziehen!** Entfernen Sie die Versicherungskarte aus dem Kartenslot.

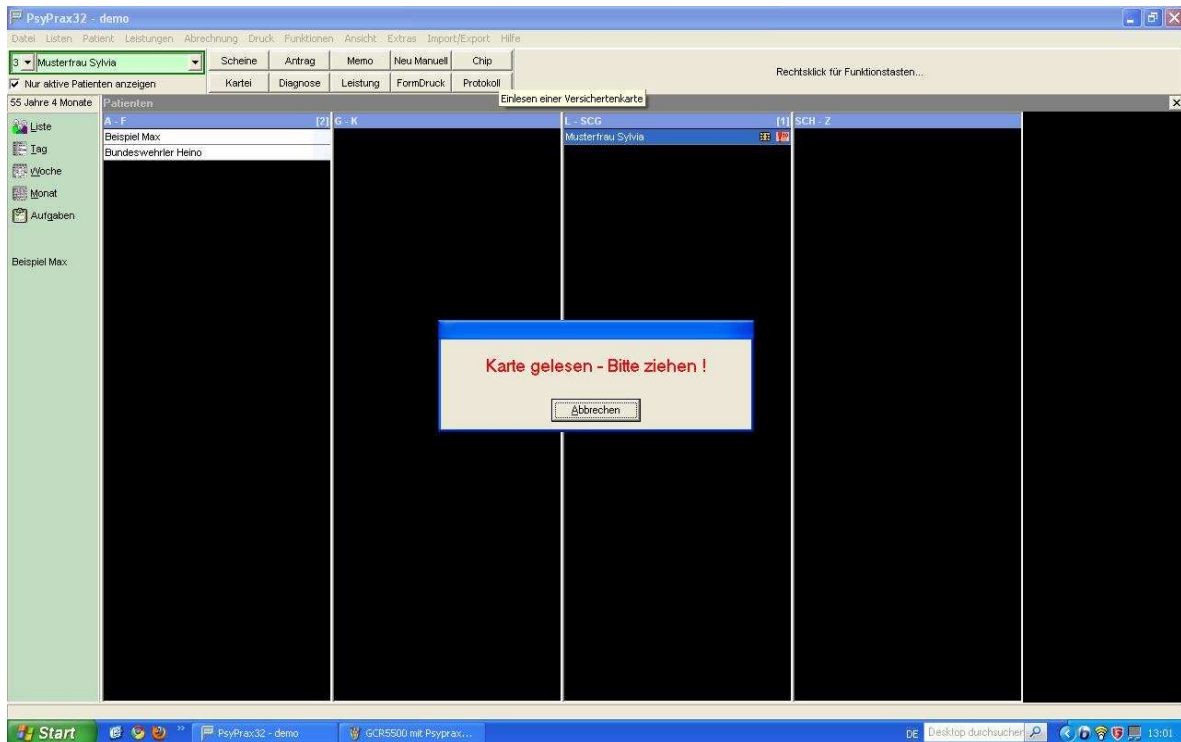

Die Kartendaten werden nun in PsyPrax angezeigt und Sie können mit der Bearbeitung des Patienten-Stammblasses beginnen:

