



Gemalto GCR5500-D mit DENS office


Installieren Sie zunächst das GCR5500 über die im Lieferumfang enthaltene Treiber CD. In der Systemsteuerung wird Ihnen anschließend der aktivierte COM-Port angezeigt. Öffnen Sie dazu Die Systemsteuerung auf Ihrem Rechner:

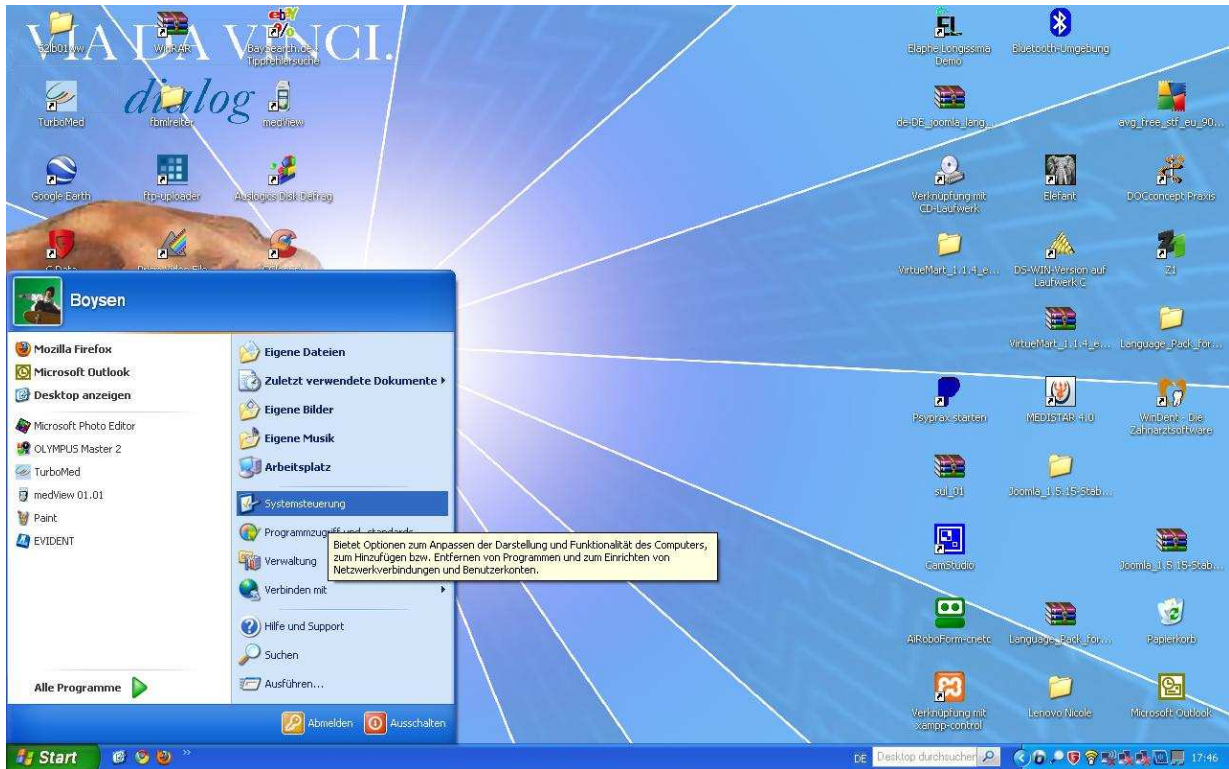


Wählen Sie den Unterordner „System“ mit Doppelklick:

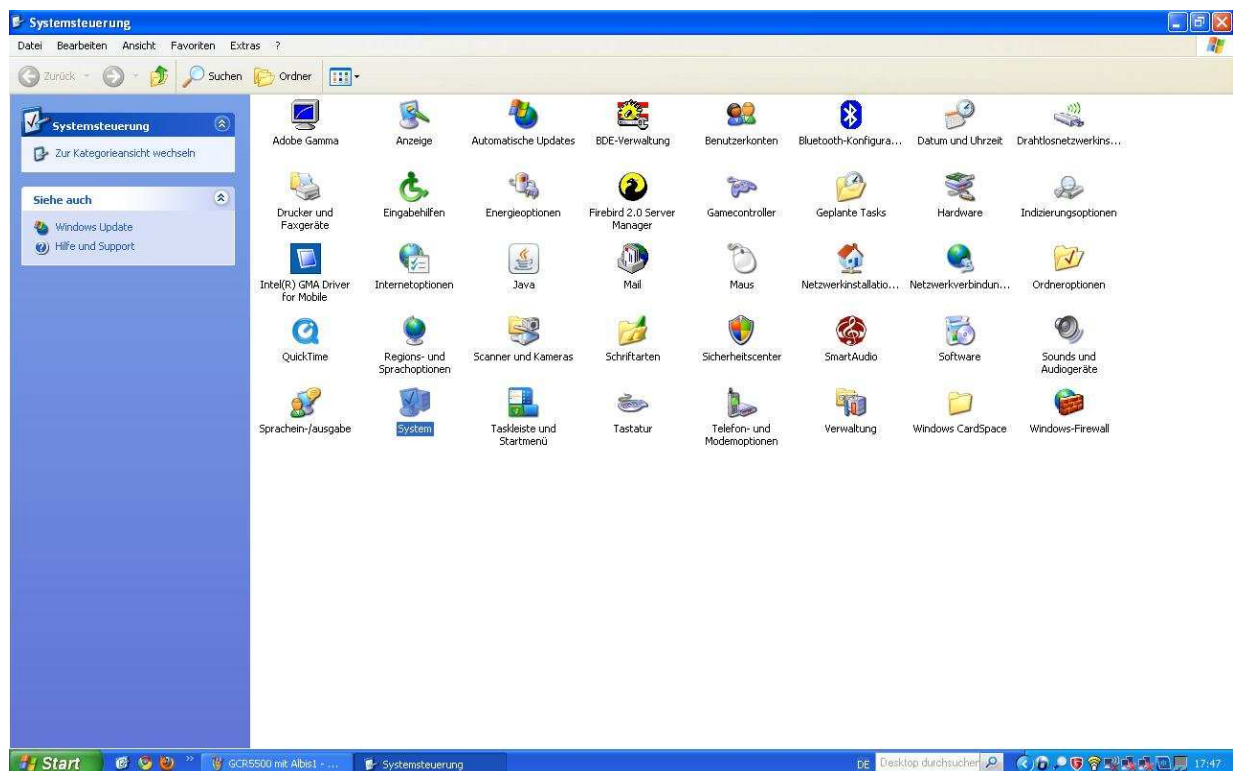

Es öffnet sich das Fenster „Systemeigenschaften“. Gehen Sie hier auf den Reiter „Hardware“ und klicken Sie auf die Schaltfläche **Geräte-Manager**.

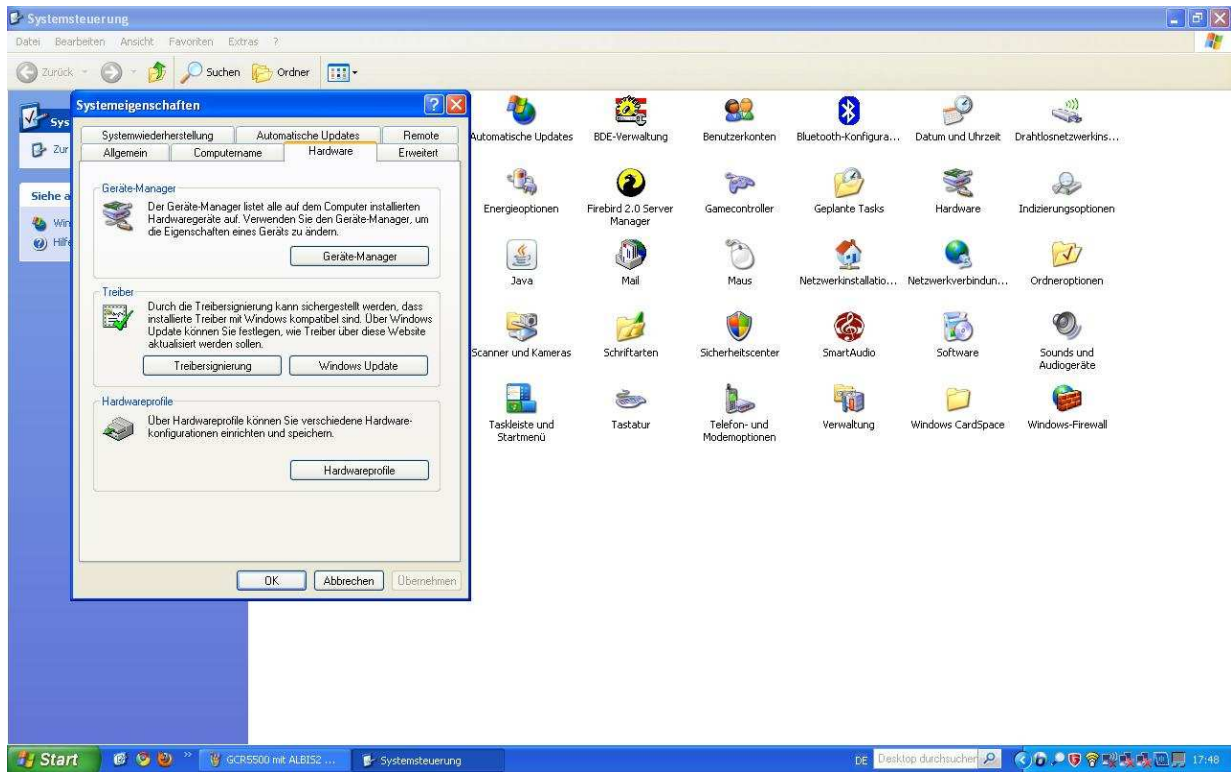


Klicken Sie auf „Anschlüsse COM und LPT“. Hier wird Ihnen das GCR5500-D angezeigt mit der aktivierten COM-Schnittstelle (in unserem Beispiel: COM 7)

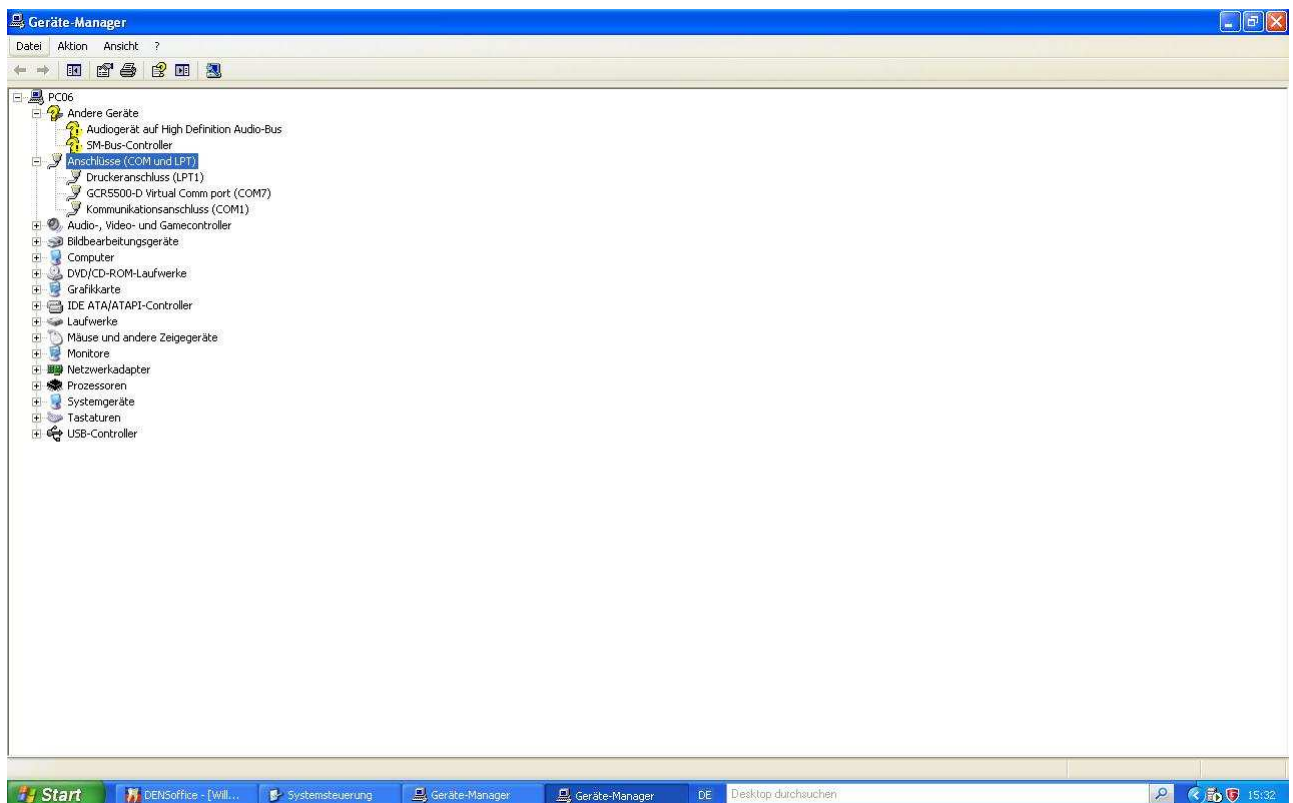


Öffnen Sie nun Ihr Praxisprogramm **DENS office** und klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Systemdaten**:




Es öffnet sich das Fenster Systemdaten. Wählen Sie links im Menü den Menüpunkt „sonstige Werte“ und dort den Menüpunkt „Schnittstellen“ aus.

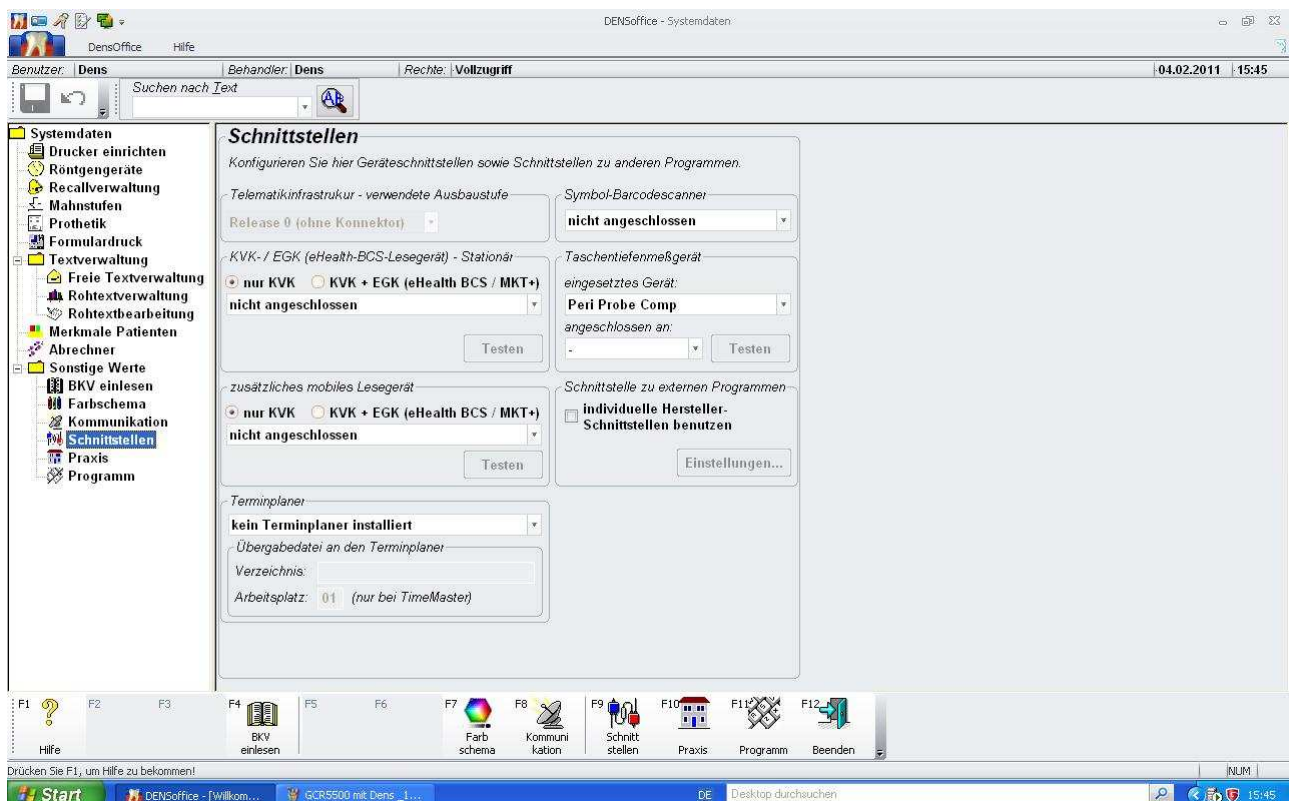


Markieren Sie in dem Feld KVK-/EGK /eHealth-BCS-Lesegerät) –Stationär KVK + EGK (eHealth BCS/ MKT+) und öffnen Sie nun die Auswahlliste indem Sie auf den Pfeilbutton rechts neben dem Eingabefeld klicken. Wählen Sie hier **Gemalto GCR5500 USB** aus.

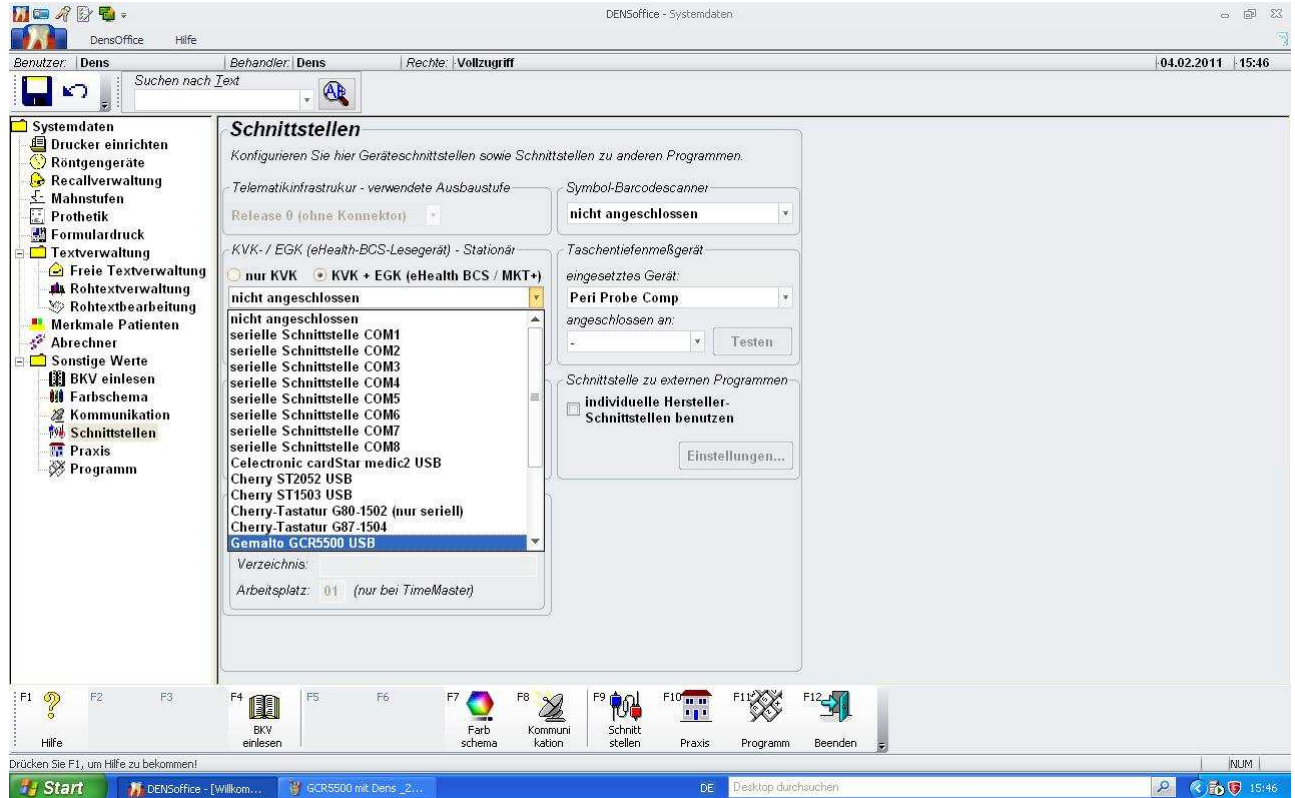


Unterhalb des Eingabefeldes, in dem nun **Gemalto GCR5500 USB** steht, erscheint nun ein Feld für den COM-Port. Tragen Sie hier den zuvor in der Systemsteuerung ermittelten COM-Port, in unserem Beispiel also die **COM7** ein. (Ebenfalls über den Pfeil-Button)

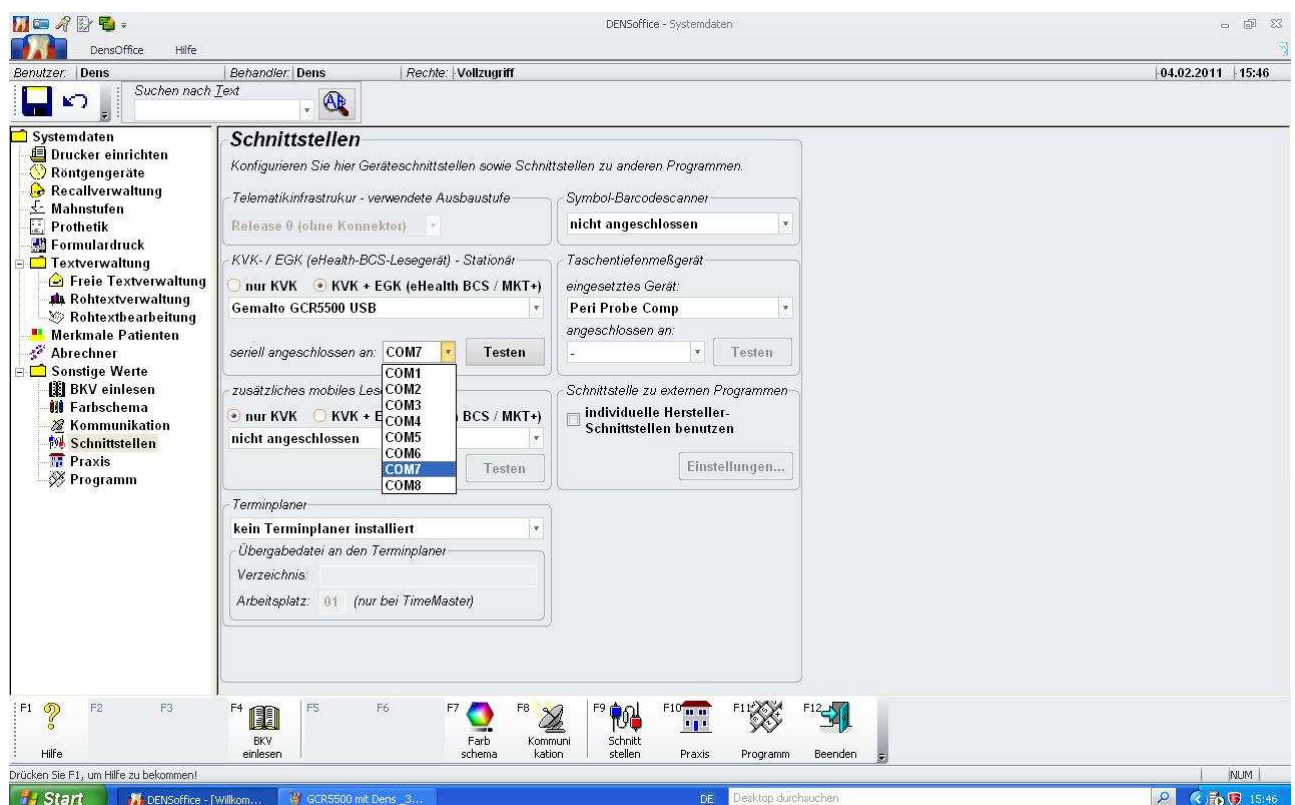

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „**Testen**“ und auf die Schaltfläche „**Karte einlesen**“

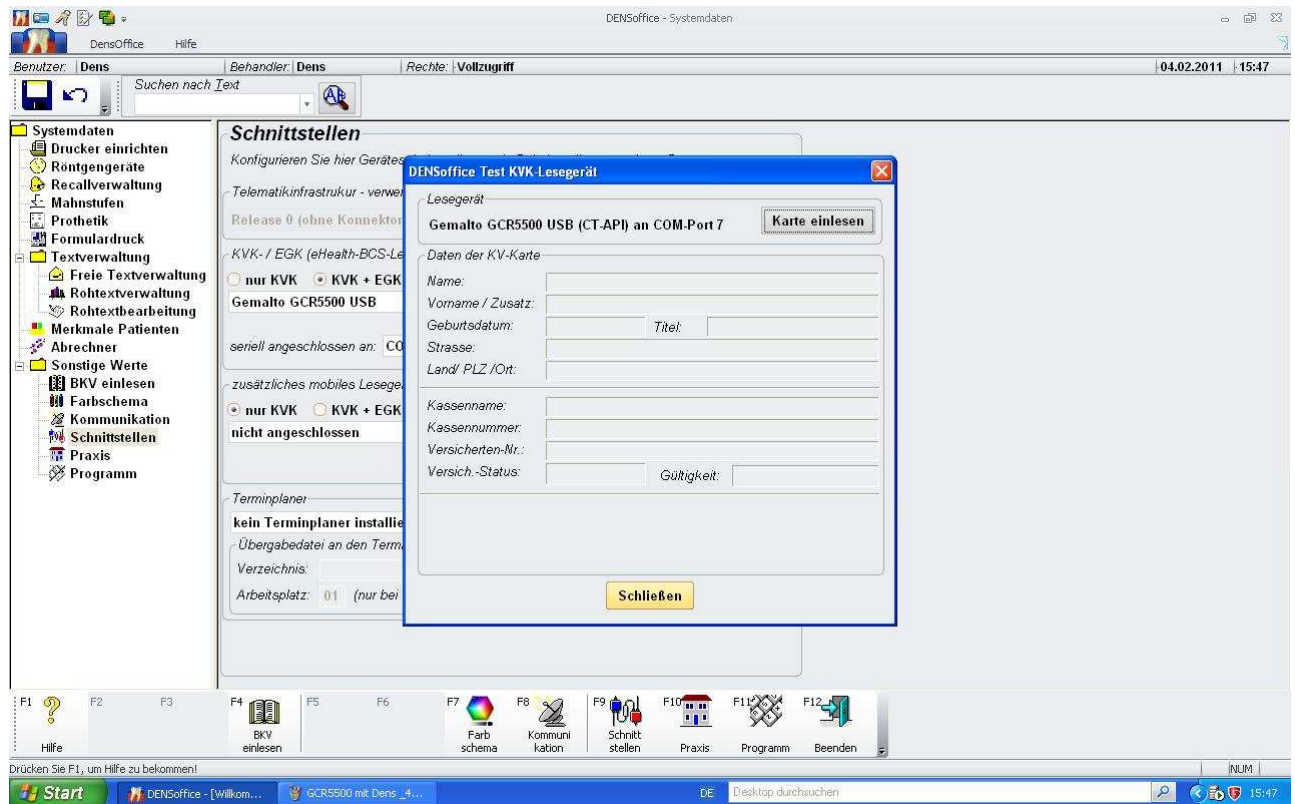

Stecken Sie eine Versichertenkarte in den Kartenlot des GCR5500 oberhalb des Displays. Die Versichertendaten werden in **Dens office** eingelesen.

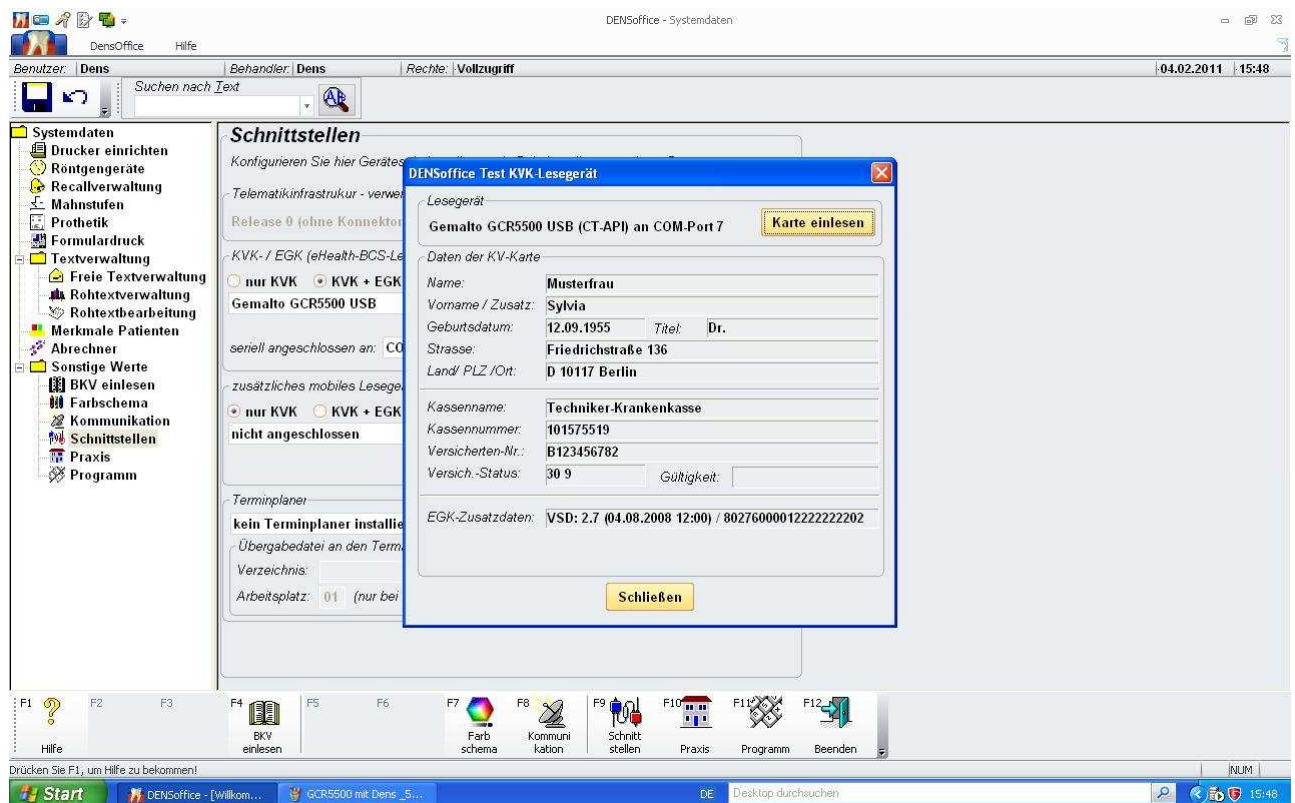

Hamburg, 6.2.2011
Via da Vinci.dialog GmbH
Service
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Tel. 040/ 84 87 87 87
www.ehealth-bcs-terminals.de
www.ehealth-terminals.de