



Gemalto GCR5500-D mit Medistar


Installieren Sie zunächst das GCR5500 über die im Lieferumfang enthaltene Treiber CD. In der Systemsteuerung wird Ihnen anschließend der aktivierte COM-Port angezeigt. Öffnen Sie dazu Die Systemsteuerung auf Ihrem Rechner:

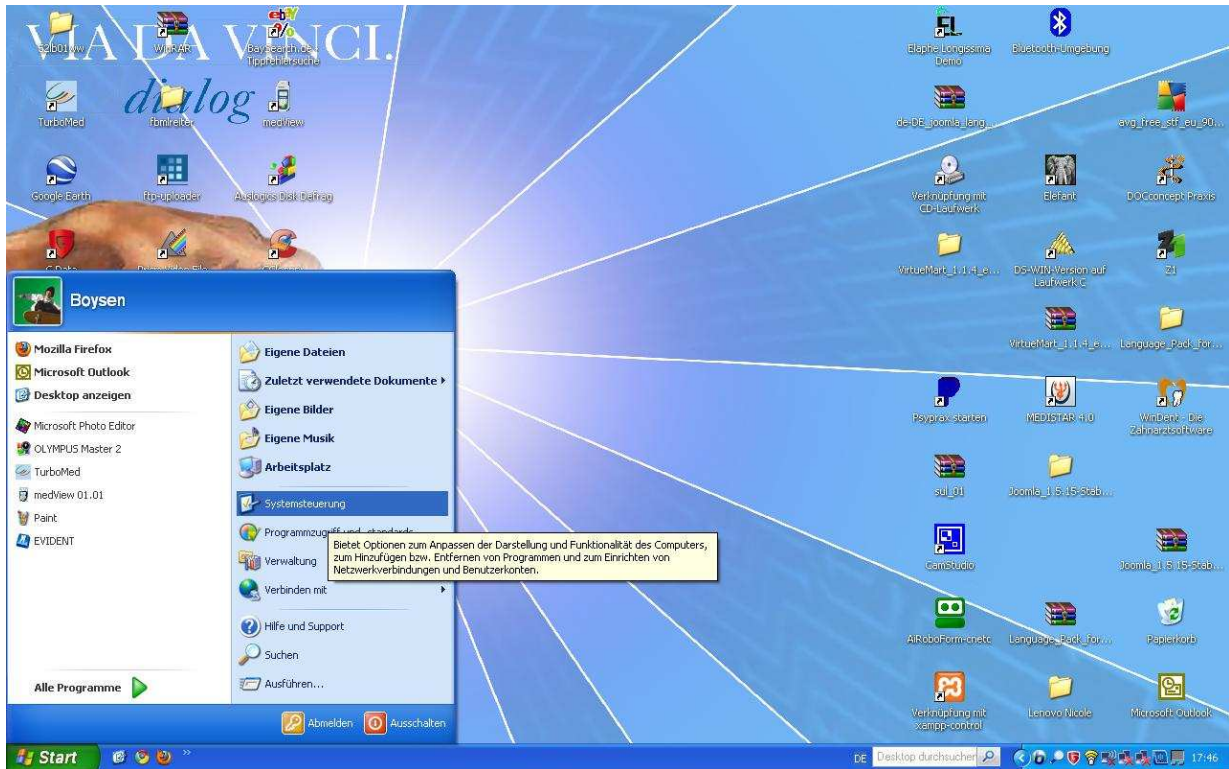


Wählen Sie den Unterordner „System“ mit Doppelklick:

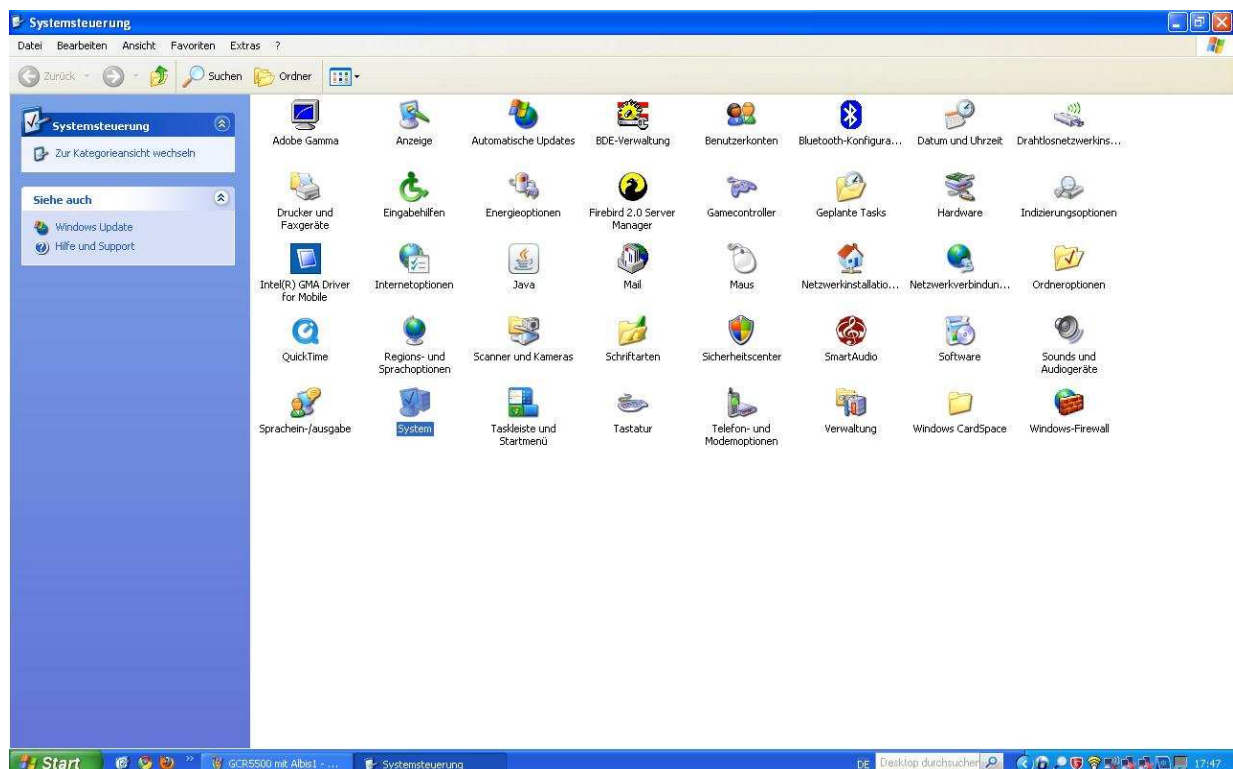


Es öffnet sich das Fenster „Systemeigenschaften“. Gehen Sie hier auf den Reiter „Hardware“ und klicken Sie auf die Schaltfläche **Geräte-Manager**.

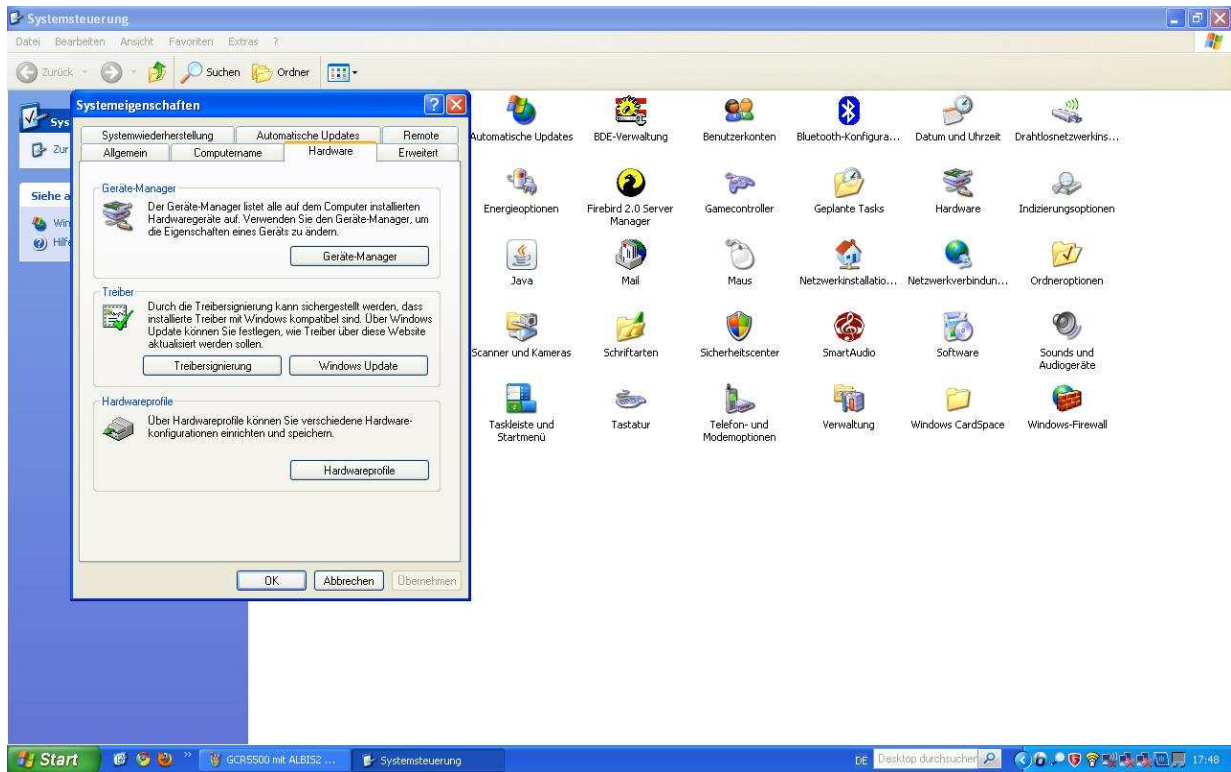


Klicken Sie auf „Anschlüsse COM und LPT“. Hier wird Ihnen das GCR5500-D angezeigt mit der aktivierten COM-Schnittstelle (hier COM 3)

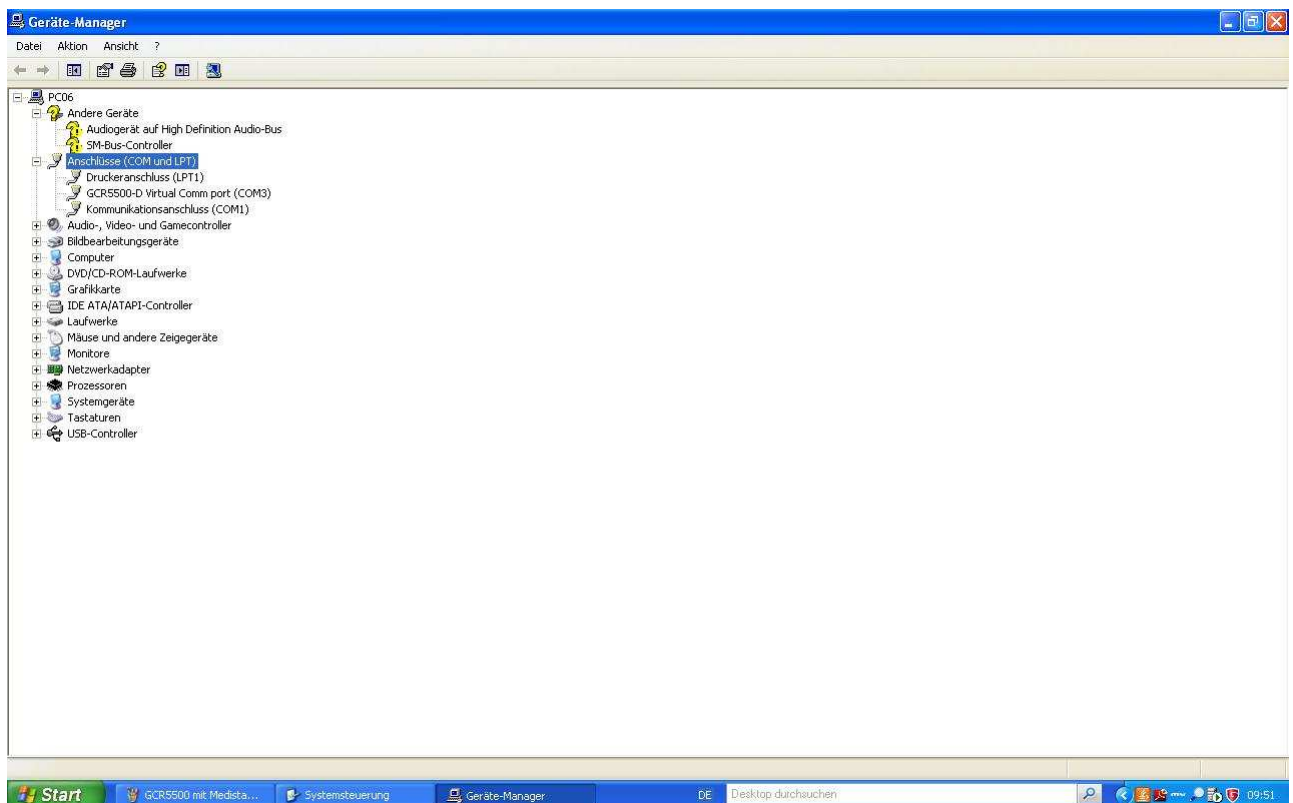


Öffnen Sie nun Ihr Praxisprogramm Medistar und geben Sie hier oben im gelb markierten Eingabefeld die drei Buchstaben **IDN** ein. Anschließend die RETURN-Taste betätigen:

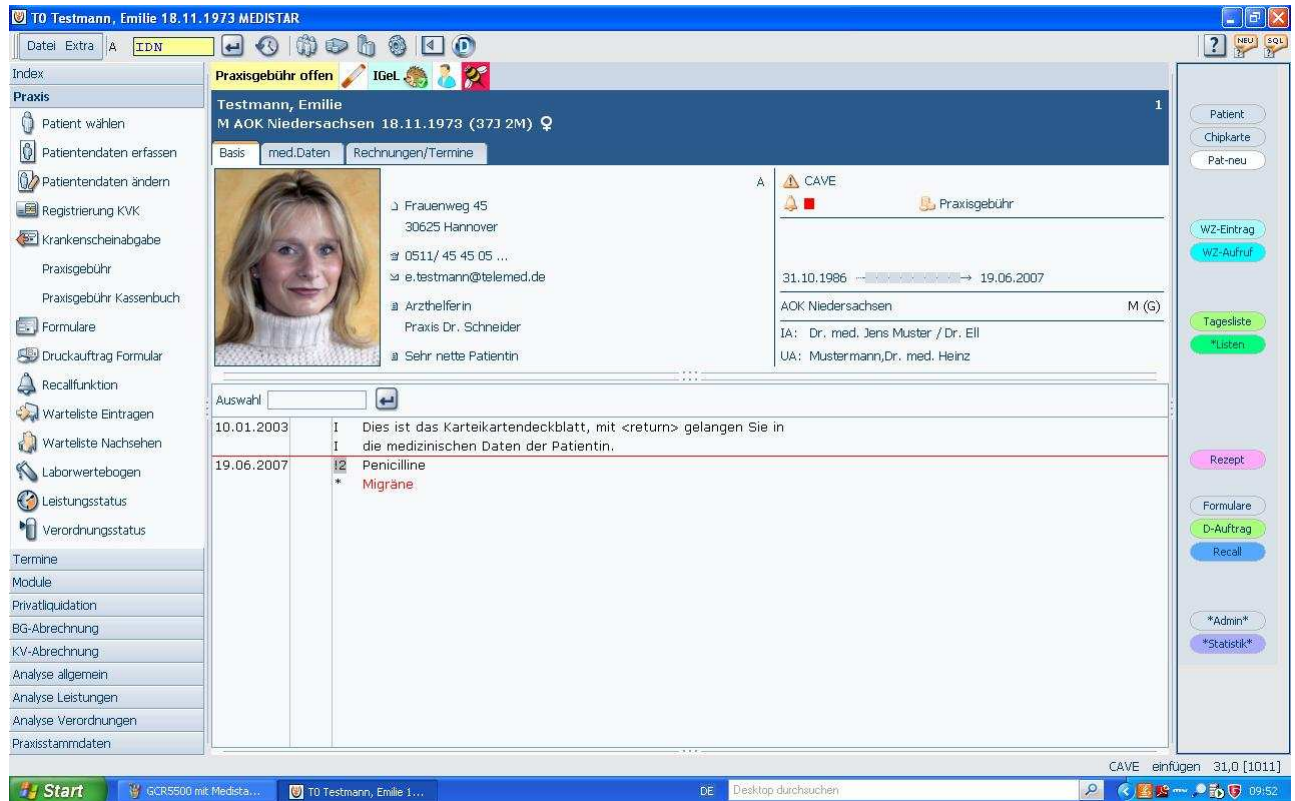


Es erscheint das Fenster „Dateinamen“. Geben Sie hier im Feld Schnittstelle ein CR0 (Zahl 0) und klicken Sie auf **ok**.

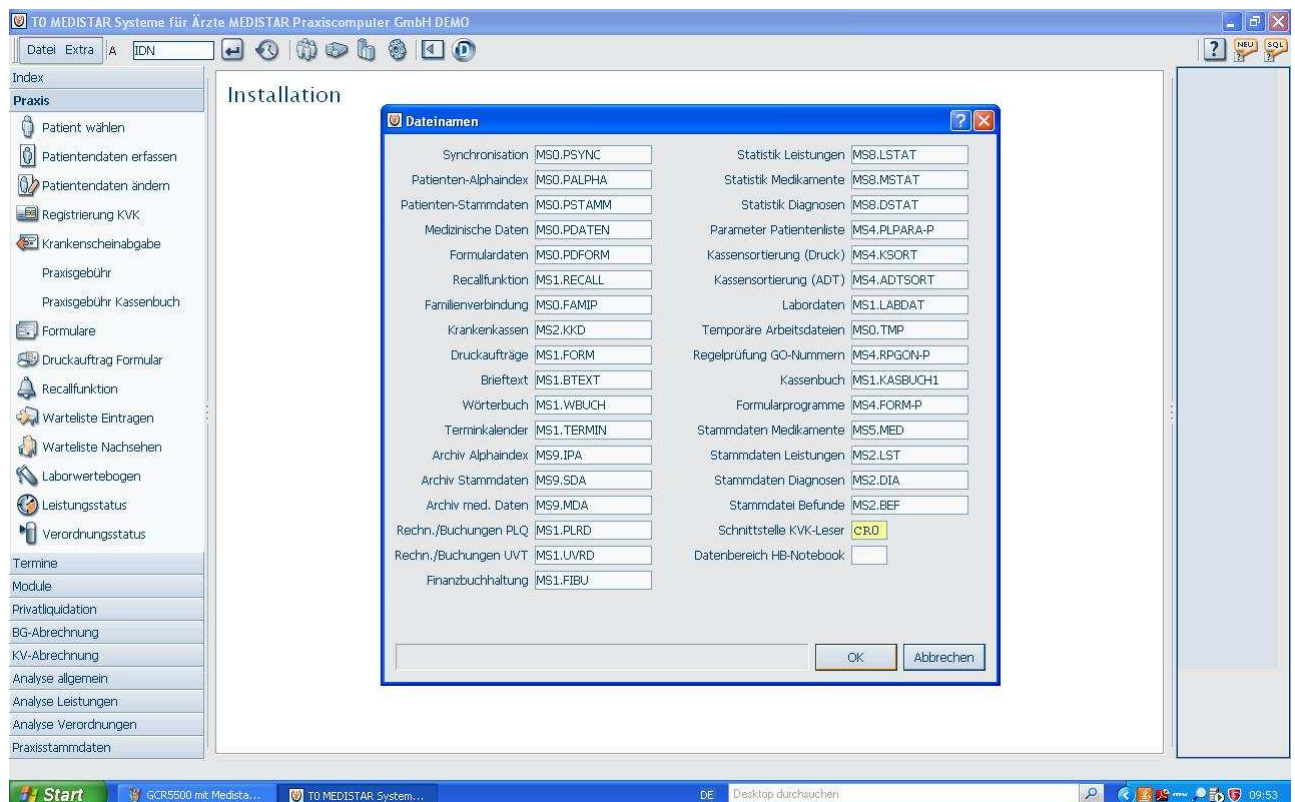



Wählen Sie nun links oben im Albis Fenster per Mausclick „Index“ an: Unter anderem erscheint hier der Menüpunkt „Installation“. Diesen klicken Sie bitte an:

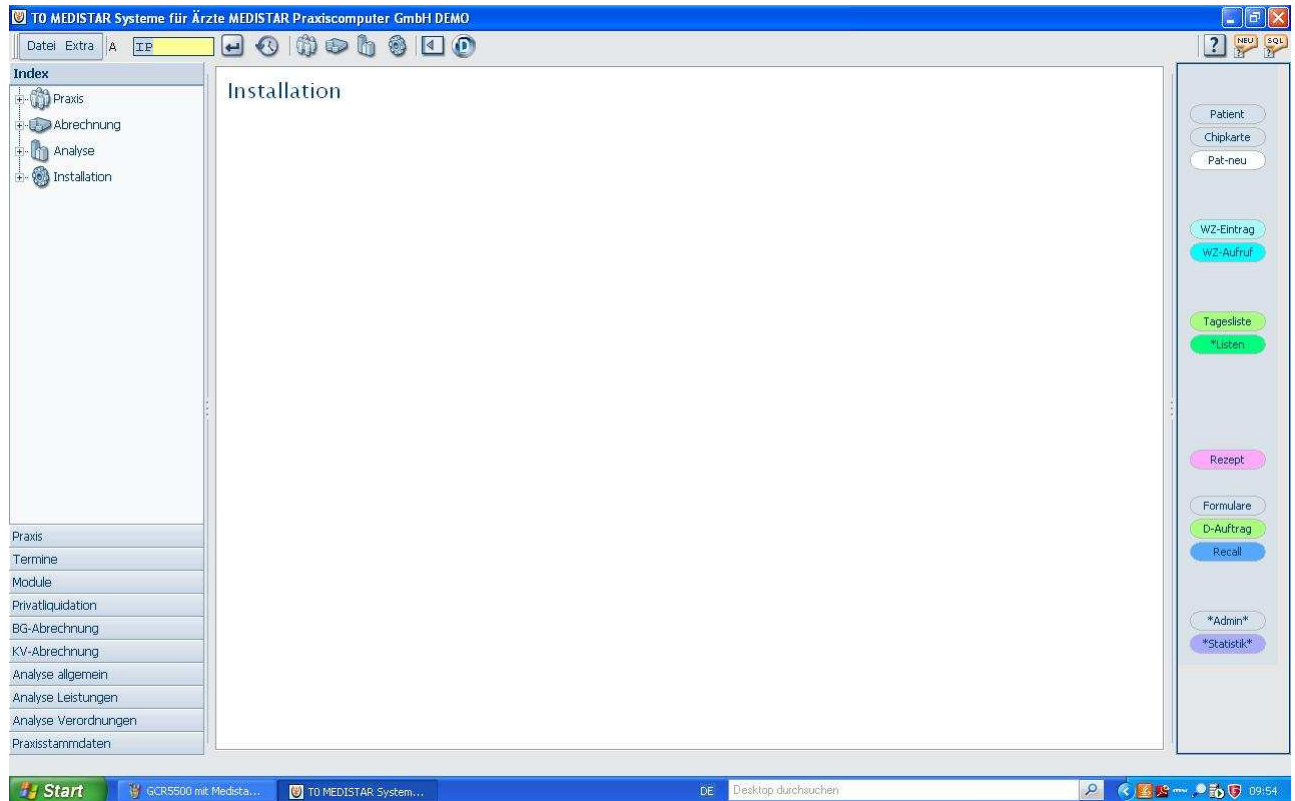


Es öffnet sich das Fenster Installation. Klicken Sie links auf den Menüpunkt „eGK“, dann auf MKT+ Konfiguration. Wählen Sie aus der Liste das Gemalto GCR 5500 aus. Die DLL erscheint automatisch im DLL – Feld. Als Port tragen Sie die COM-Port Nummer ein, die Ihnen zuvor in der Systemsteuerung angezeigt wurde, in unserem Beispiel also die 3. Anschließen bestätigen Sie die neuen Einstellungen mit **ok**.

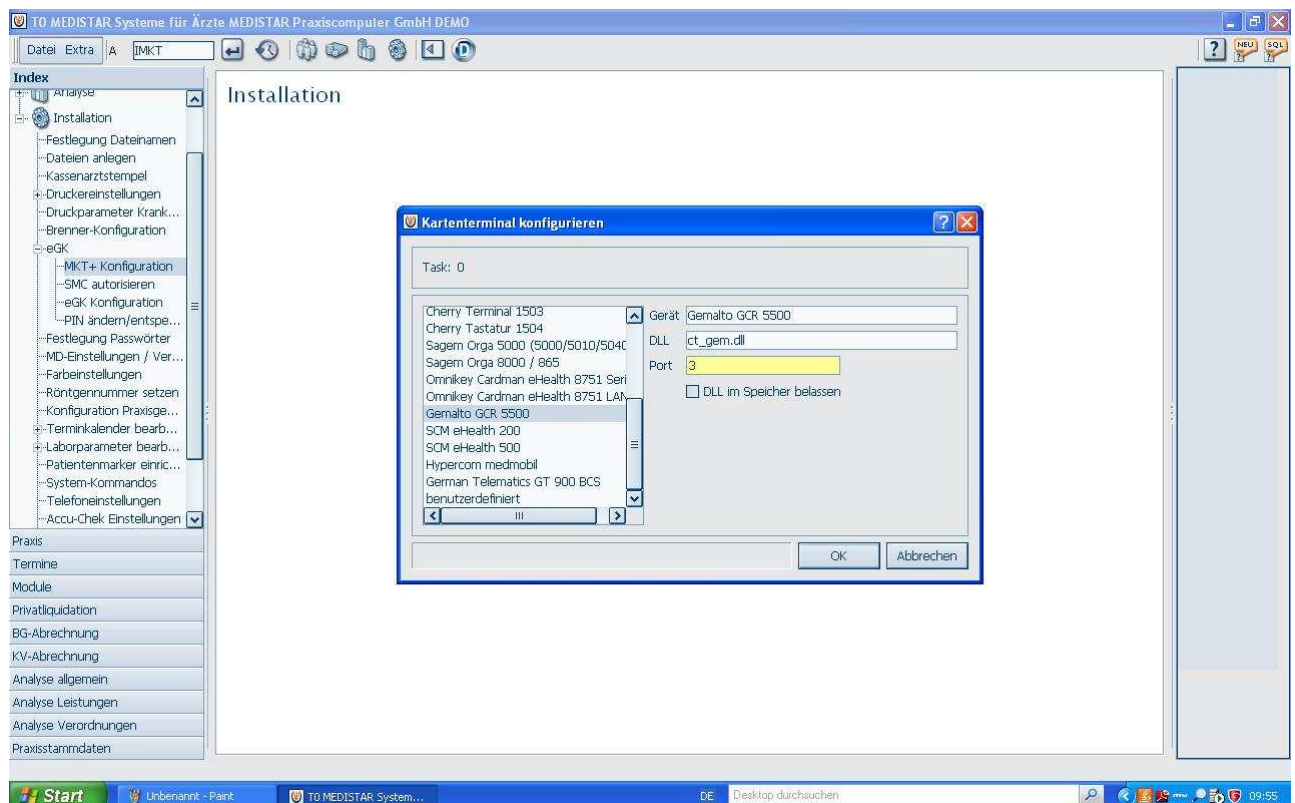

Testen Sie nun das Einlesen einer Versichertenkarte, indem Sie in Medistar oben rechts auf die Schaltfläche „Chipkarte“ klicken. Medistar fordert Sie nun auf, die Versichertenkarte in den Slot des GCR5500 einzuführen, das Lesegerät zeigt ebenfalls an „**bitte Karte einführen**“

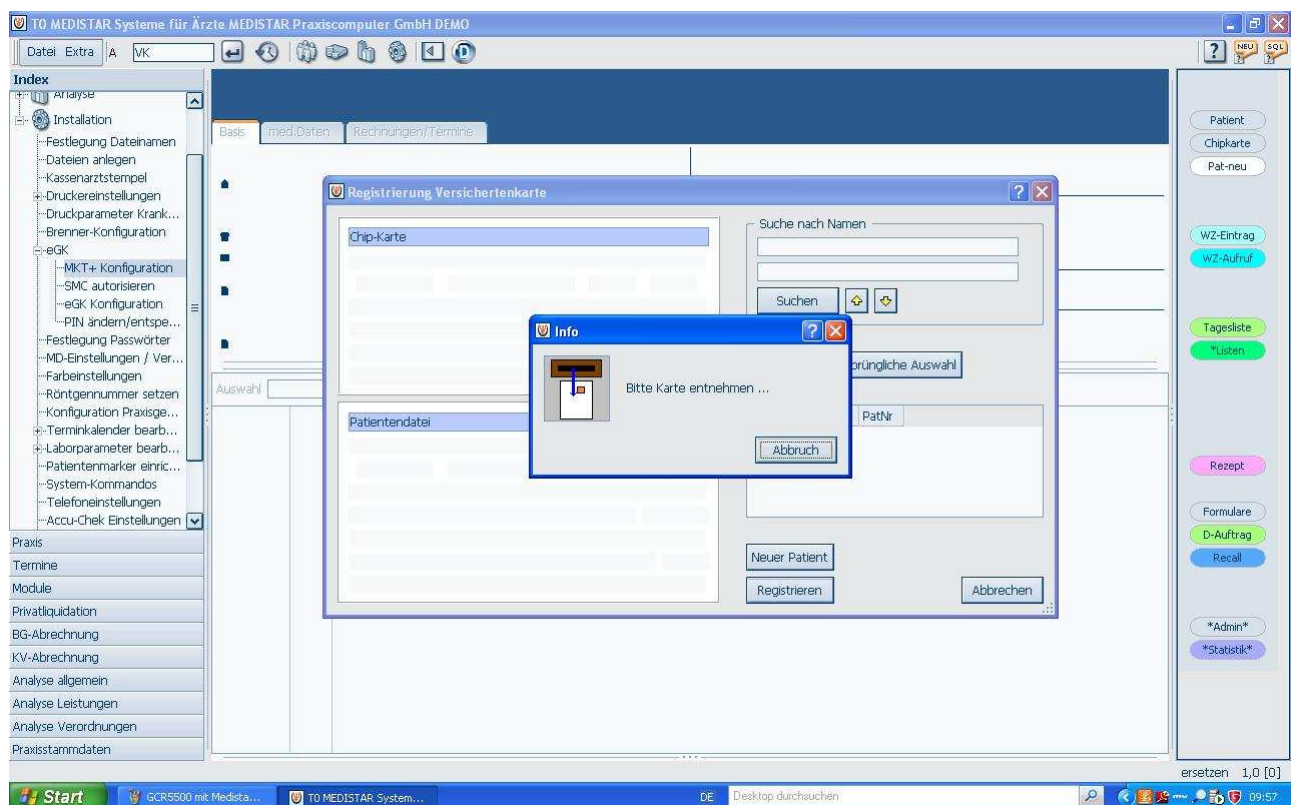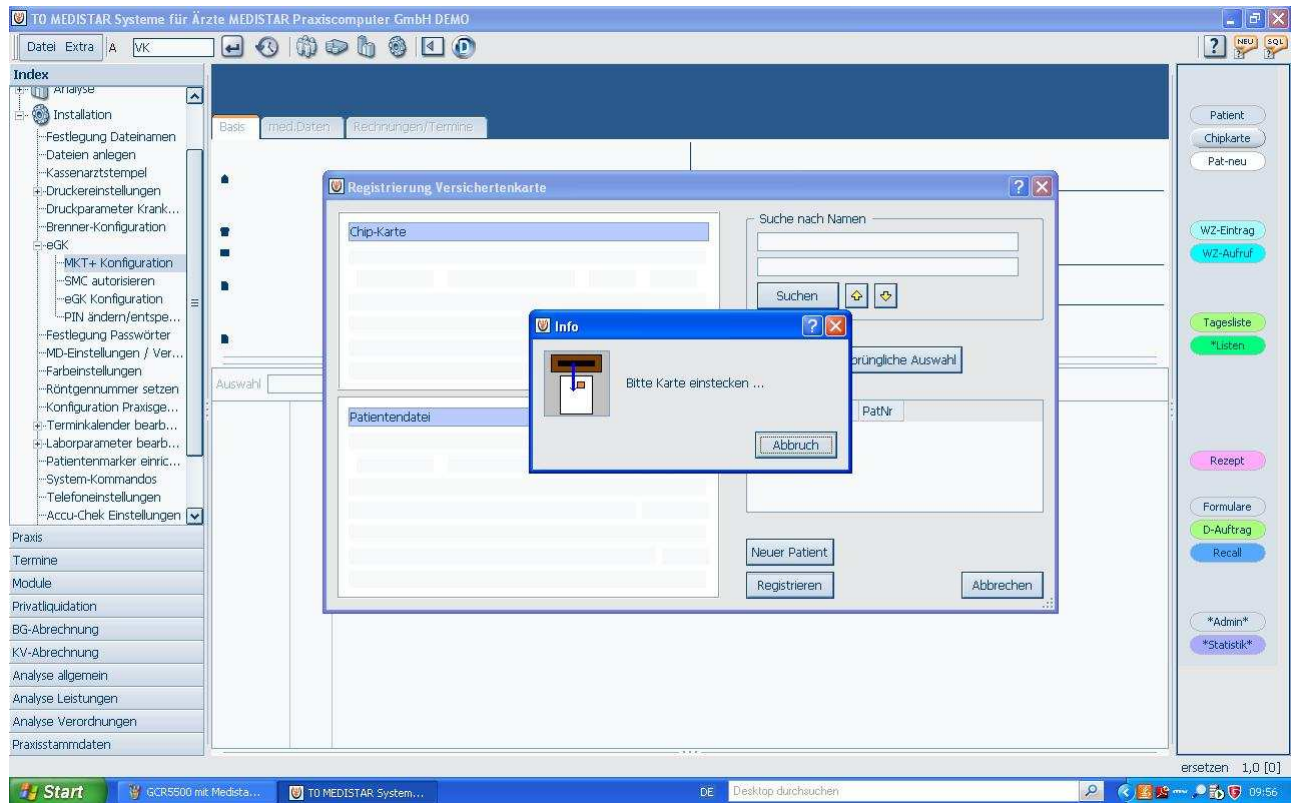

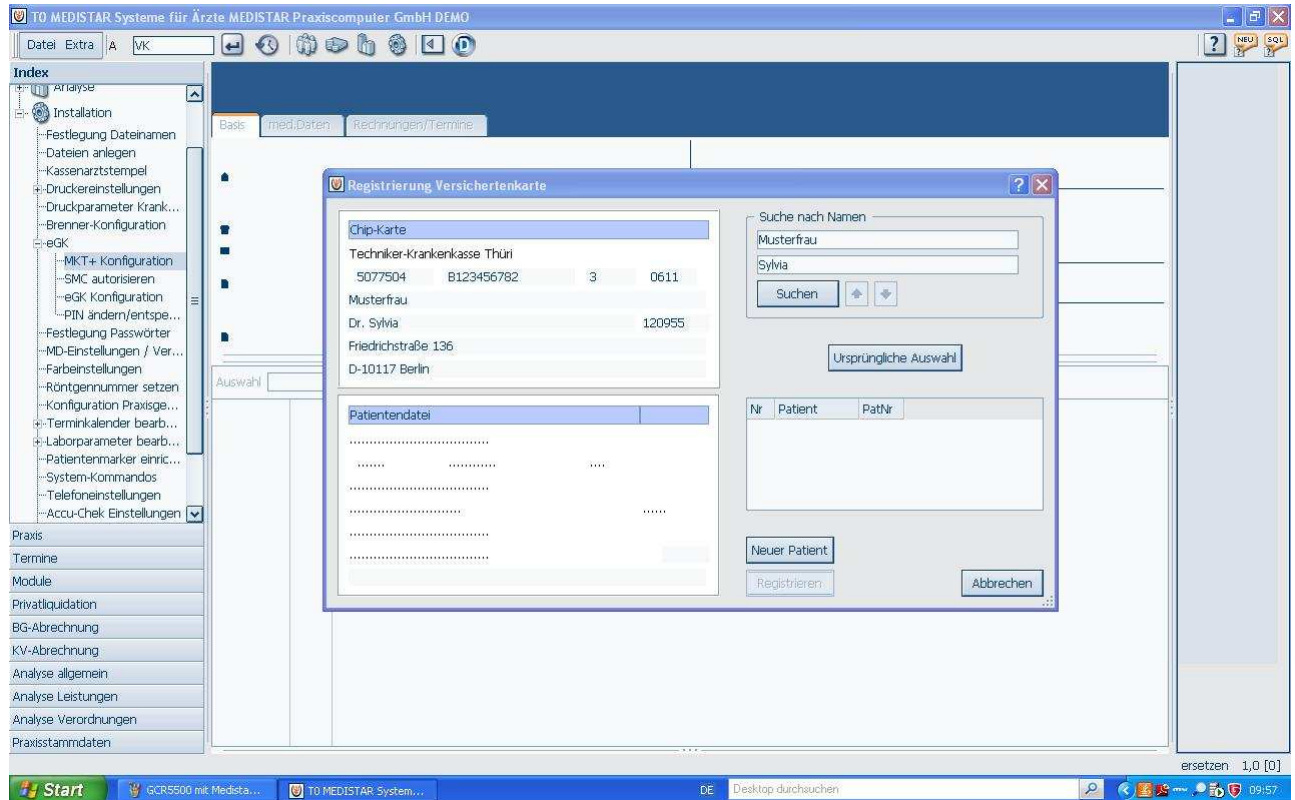

Die Krankenversichertenkarte/Gesundheitskarte wurde erfolgreich in Medistar eingelesen

Hamburg, 1.2.2011
Via da Vinci.dialog GmbH
Service
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Tel. 040/ 84 87 87 87
www.ehealth-bcs-terminals.de
www.ehealth-terminals.de