


Gemalto GCR5500-D mit Z1


Installieren Sie zunächst das GCR5500 über die im Lieferumfang enthaltene Treiber CD. In der Systemsteuerung wird Ihnen anschließend der aktivierte COM-Port angezeigt. Öffnen Sie dazu Die Systemsteuerung auf Ihrem Rechner:




Wählen Sie den Unterordner „System“ mit Doppelklick:

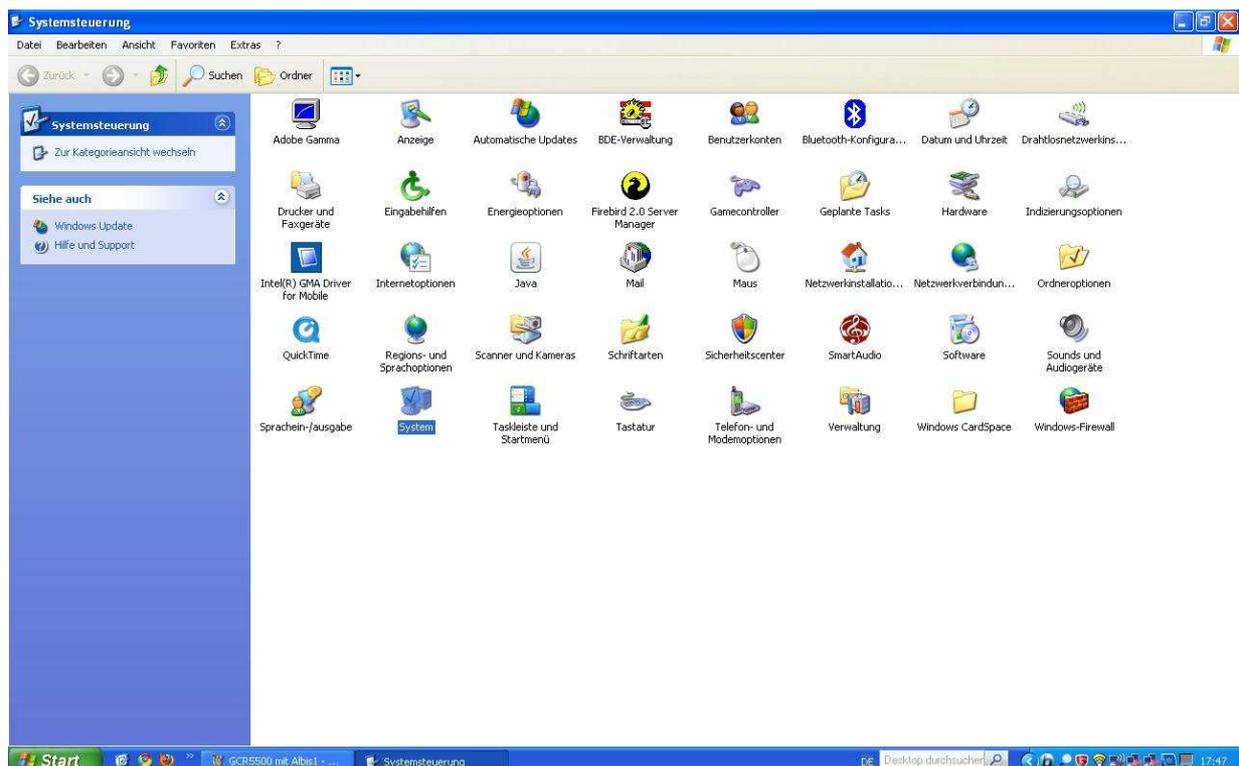

Es öffnet sich das Fenster „Systemeigenschaften“. Gehen Sie hier auf den Reiter „Hardware“ und klicken Sie auf die Schaltfläche **Geräte manager**.

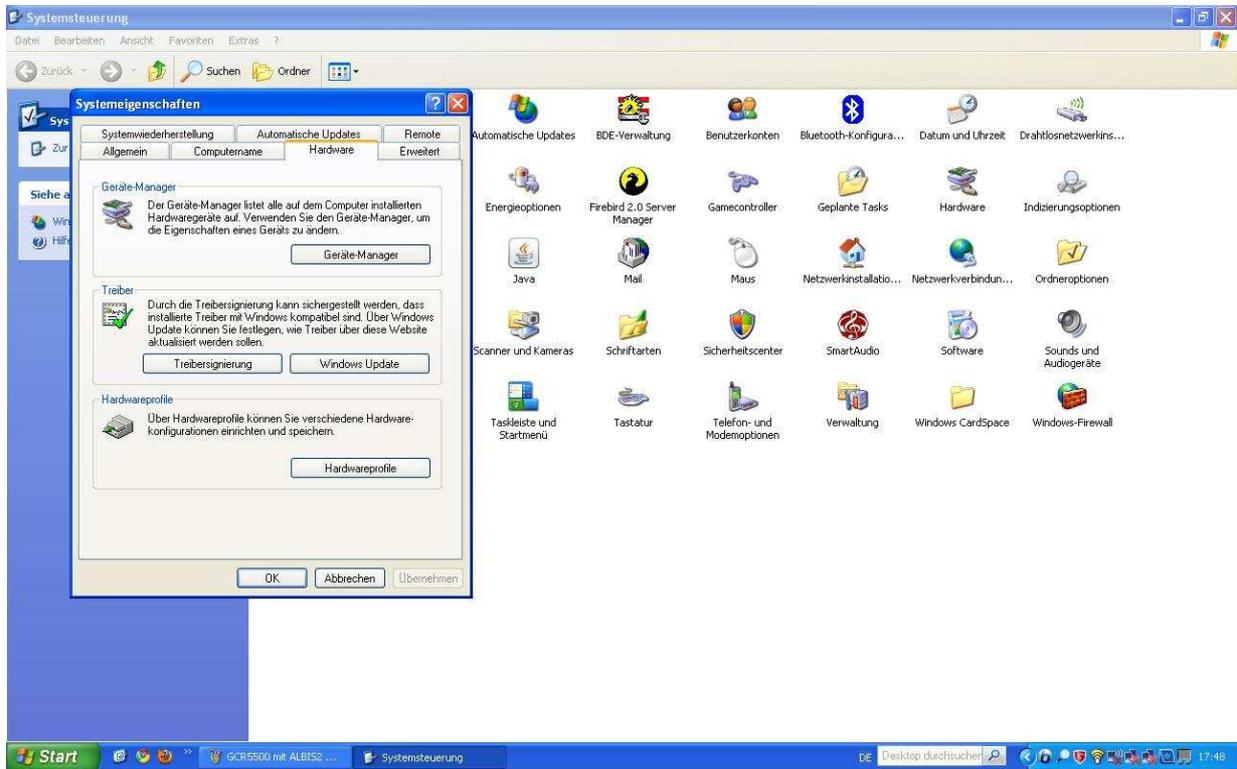


Klicken Sie auf „Anschlüsse COM und LPT“. Hier wird Ihnen das GCR5500-D angezeigt mit der aktivierten COM-Schnittstelle (in unserem Beispiel: COM 2)

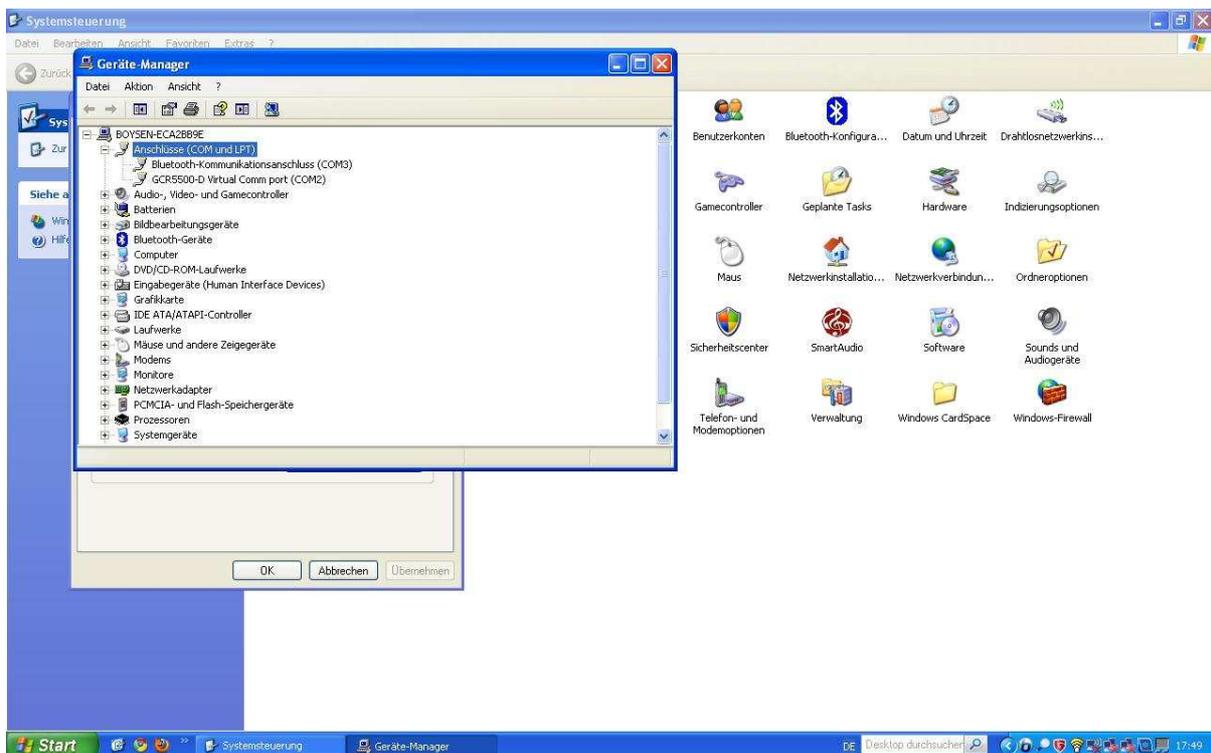


Öffnen Sie nun Ihr Praxisprogramm Z1 und wählen Sie im Register **System** Ordner Stammdaten per Doppelclick.




Es öffnet sich das Fenster Stammdaten. Wählen Sie das Register **System** und dort den Menüpunkt **Arbeitsplatz**:

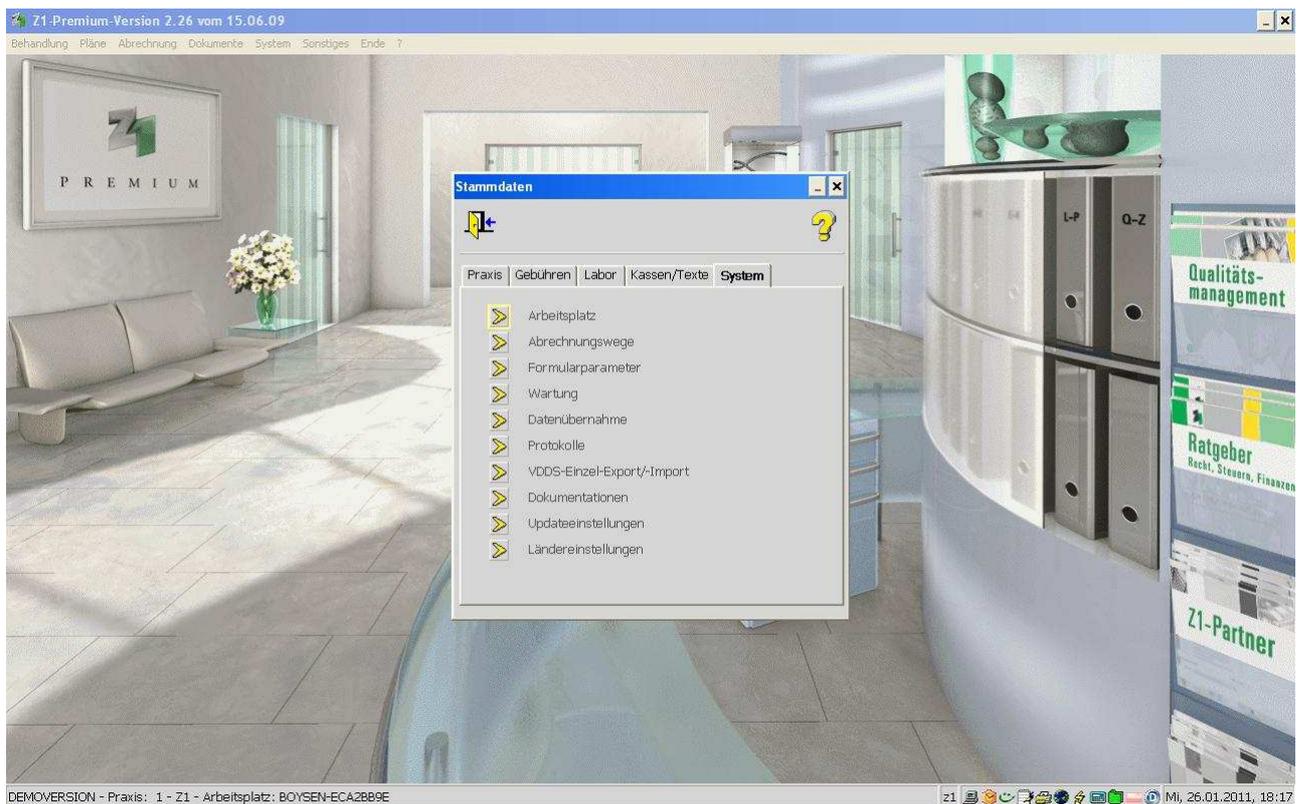


Klicken Sie hier auf den Pfeil neben dem Feld „Kartenleser“. Es öffnet sich eine Auswahl an Schnittstellen. Markieren Sie hier **CT-API**.

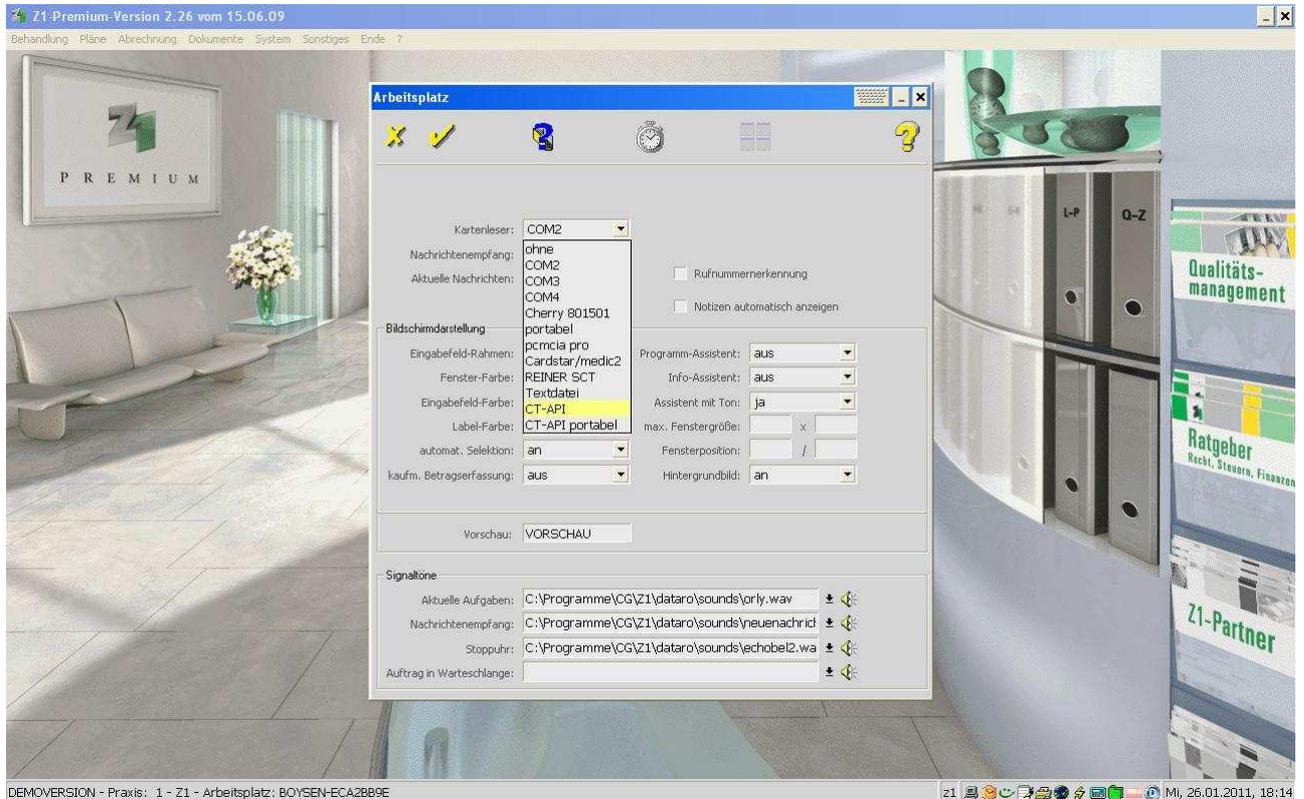

Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld **Datei** und markieren Sie die Auswahl **C:\WINDOWS\system32\CT_GEM.dll**

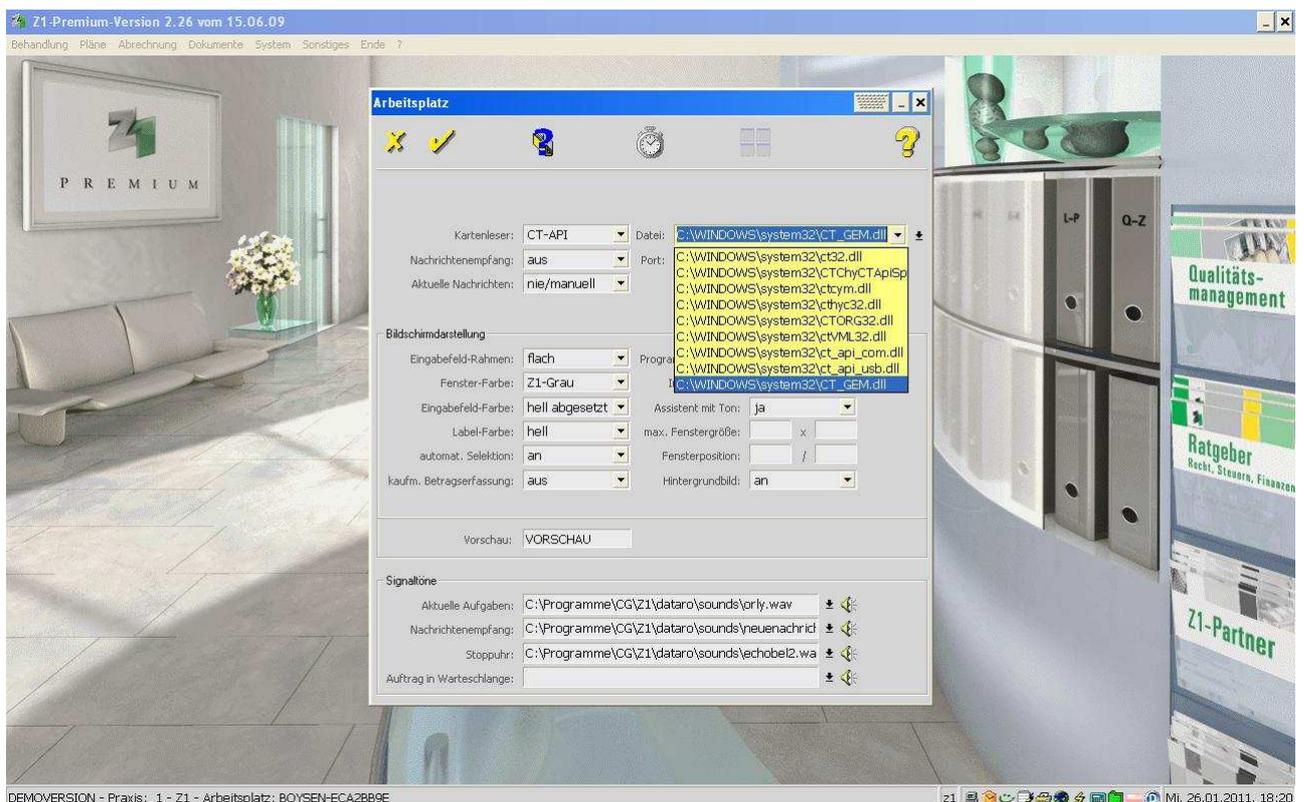

In das Feld **Port** geben Sie die COM-Port Nummer ein, die Ihnen in der Systemsteuerung angezeigt wurde, also wie in unserem Beispiel die **2**. Bestätigen Sie die neuen Einstellungen mit dem gelben OK Haken.

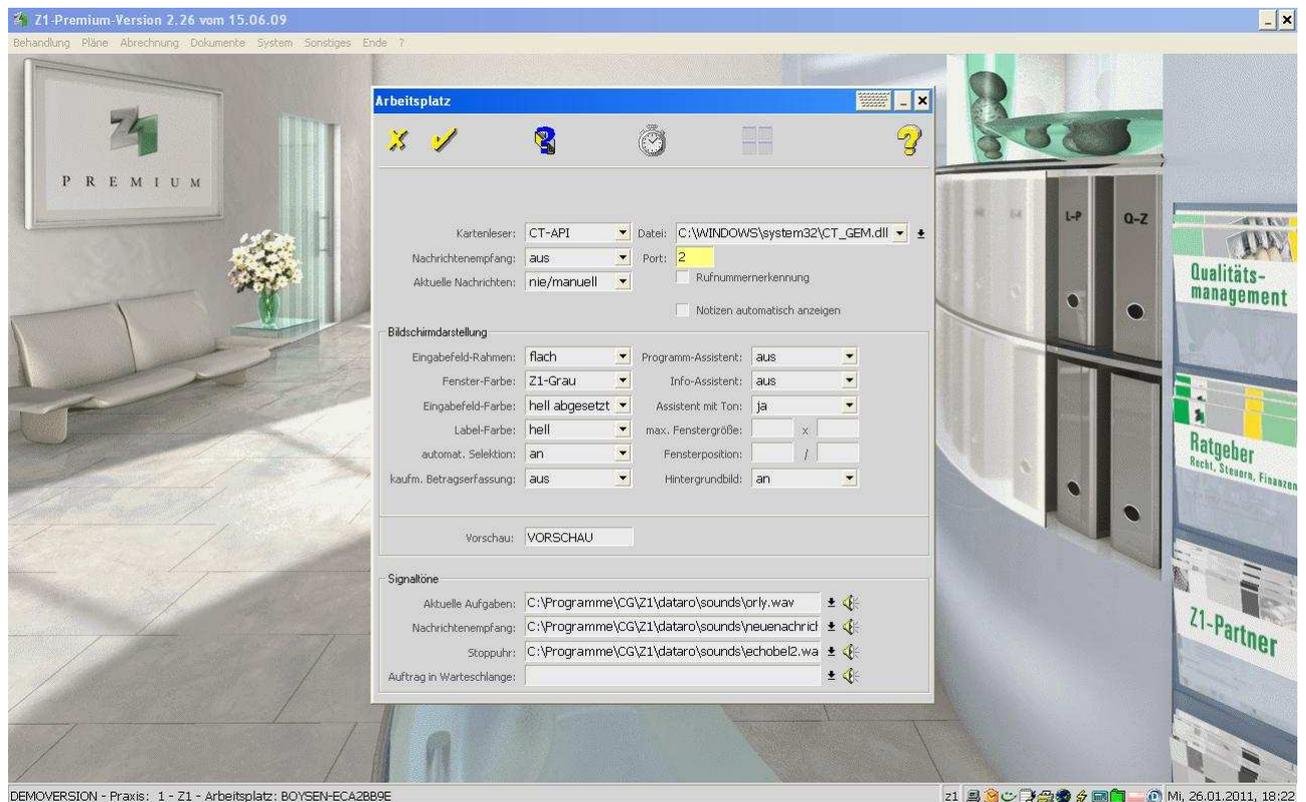

Sie werden nun aufgefordert, Z1 neu zu starten damit die geänderten Einstellungen wirksam werden. Lesen Sie nun eine Versichertenkarte über das GCR5500 ein

Hamburg, 31.1.2011
Via da Vinci.dialog GmbH
Service
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Tel. 040/ 84 87 87 87
www.ehealth-bcs-terminals.de
www.ehealth-terminals.de