



Cherry G87-1504 eHealth-Tastatur mit DOComfort


Installieren Sie zunächst die Cherry G87-1504 über die im Lieferumfang enthaltene Treiber CD. Schließen Sie anschließend die Tastatur an den USB-Anschluss Ihres PC's an. Vergeben Sie eine 8-stellige Admin-Pin-Nummer und bestätigen Sie diese noch einmal. Starten Sie das das Testprogramm unter Programme **Cherry eGK Software**

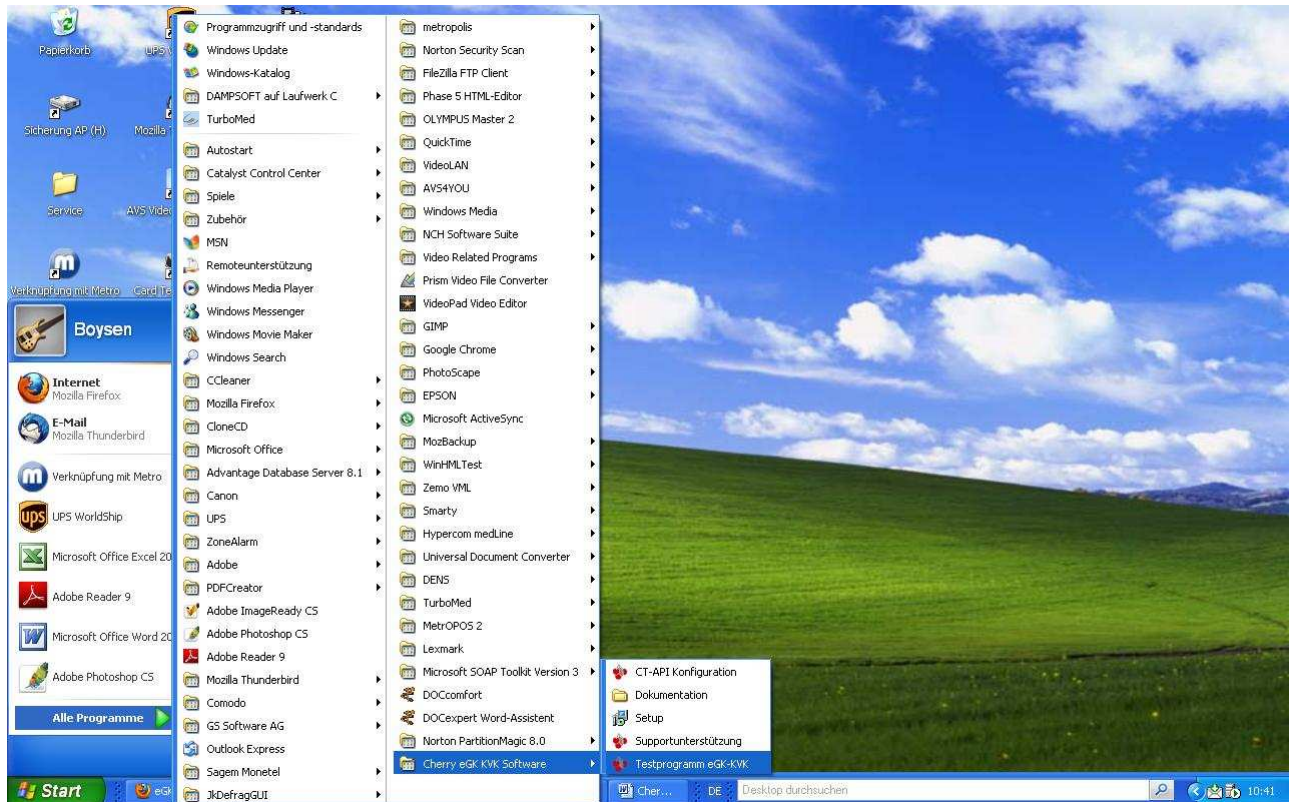

Wählen Sie hier die Tastatur aus(ST-1503 / G87-1504) und tragen Sie COM Port 1 ein.

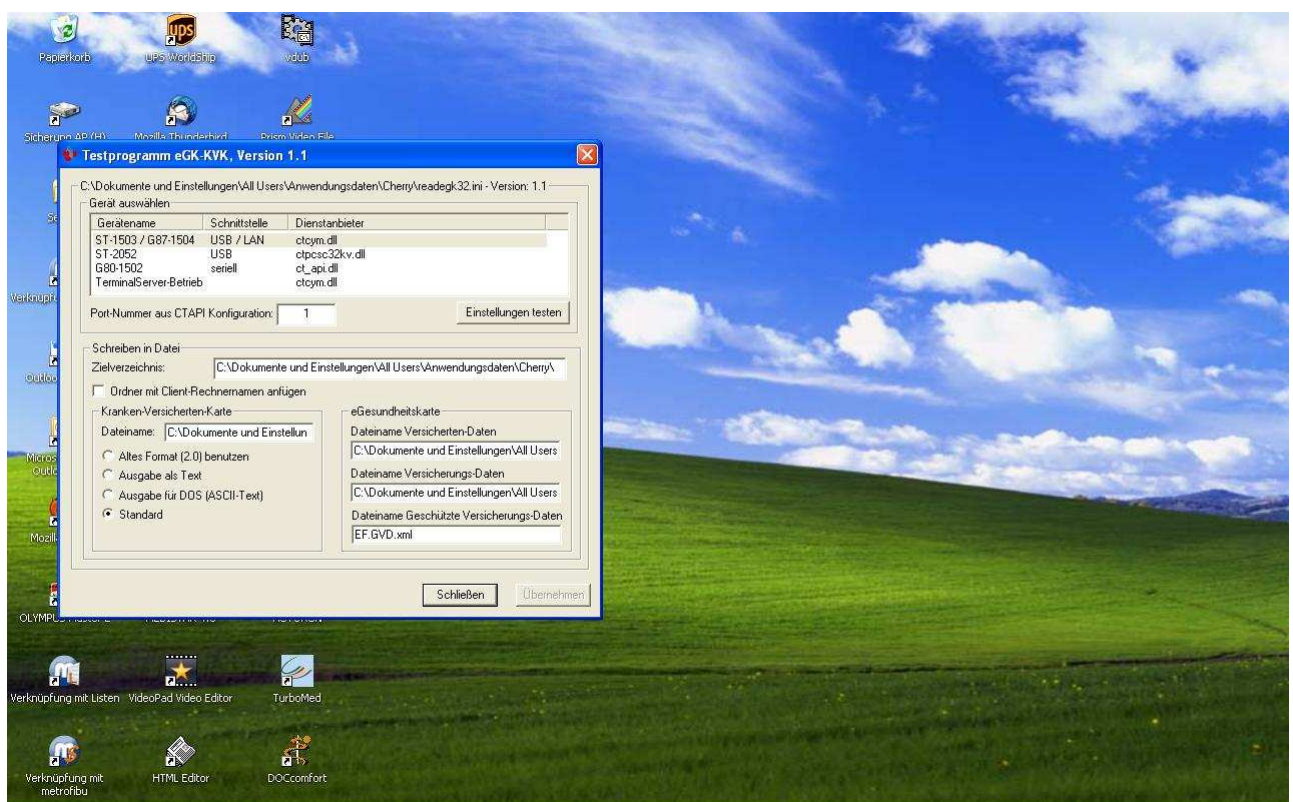


Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen testen“ und stecken Sie eine Versichertenkarte in den Kartenslot der sich neben dem Display der Tastatur befindet

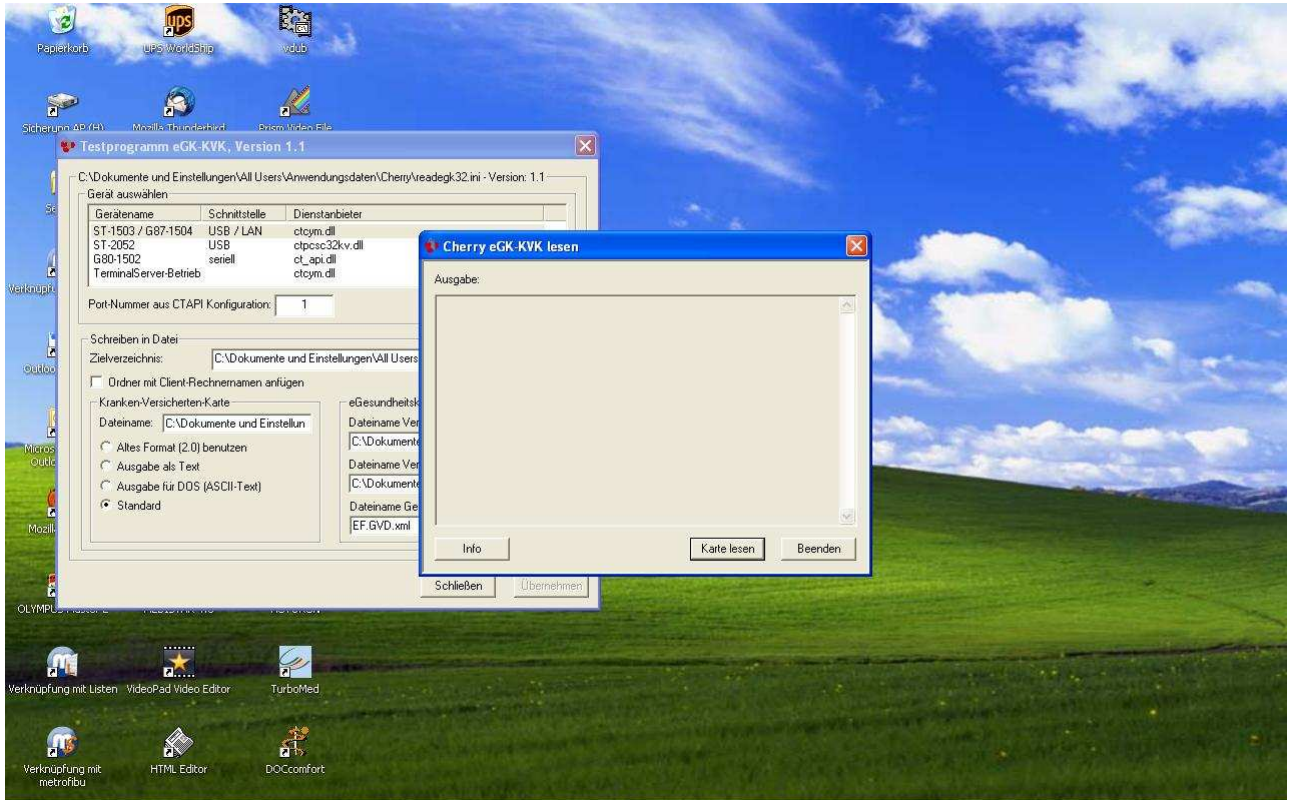


Zeigt das Ausgabefeld nun Daten an, ist die G87-1504 korrekt installiert. Beenden Sie das Testprogramm.




Öffnen Sie nun Ihr Praxisprogramm DOCcomfort und öffnen Sie das Krankenblatt

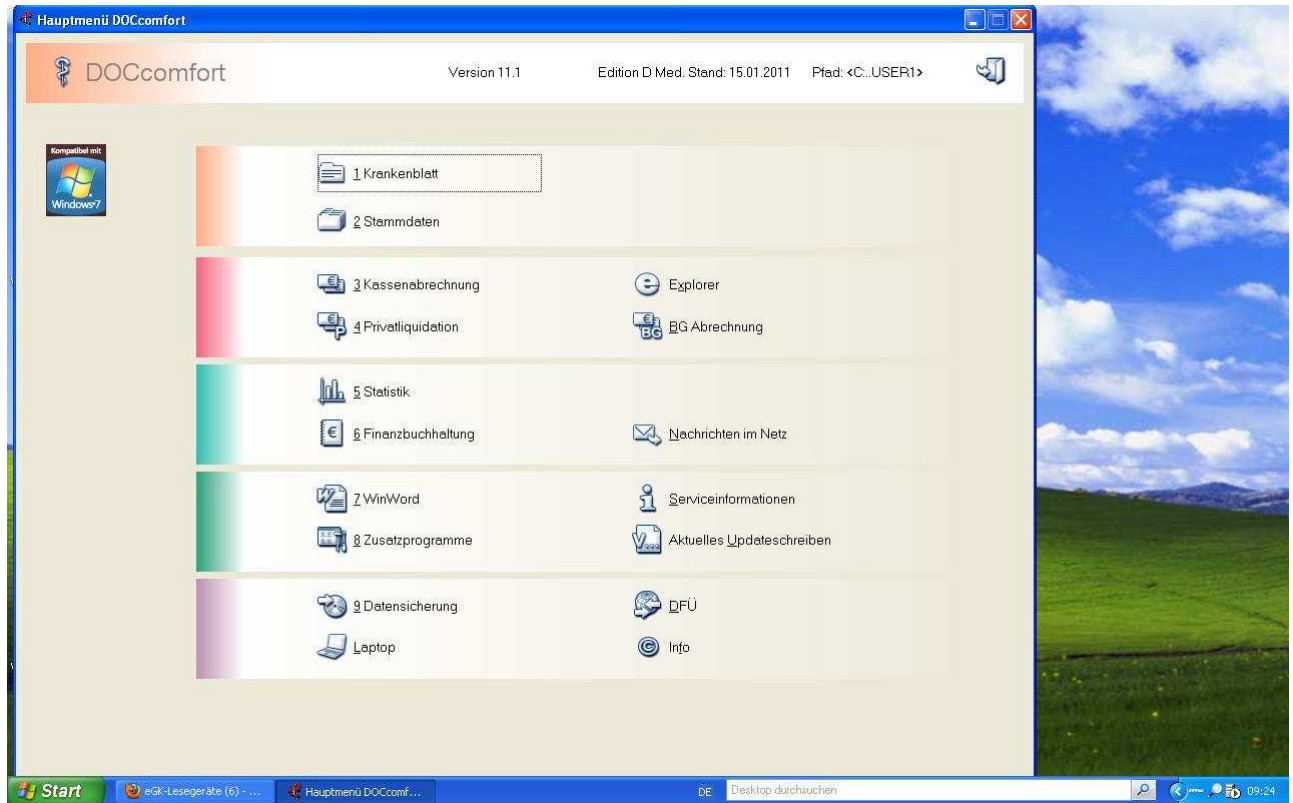


Wählen Sie hier den Menüpunkt „Einstellungen/ Geräte/ Chipkartenleser“

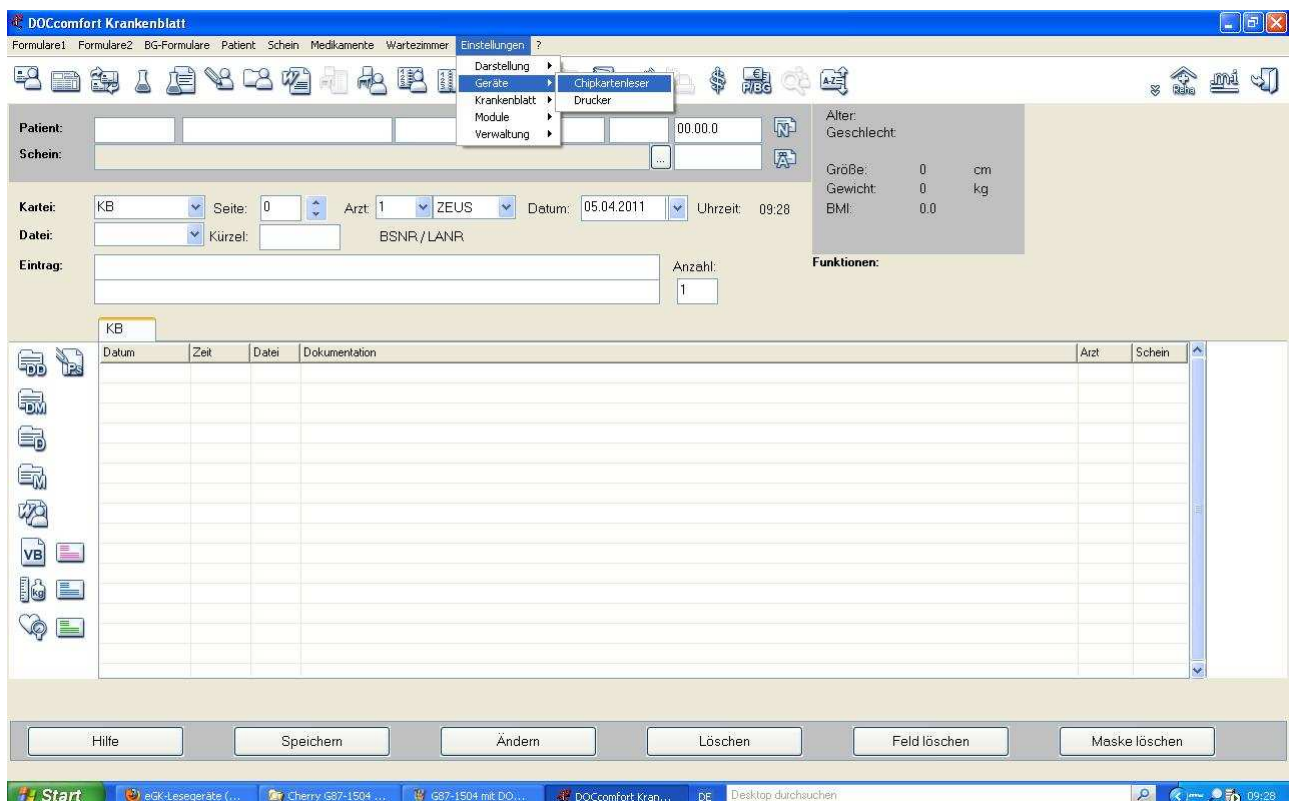


Klicken Sie im nächsten Fenster auf die Schaltfläche „Lesegeräte“

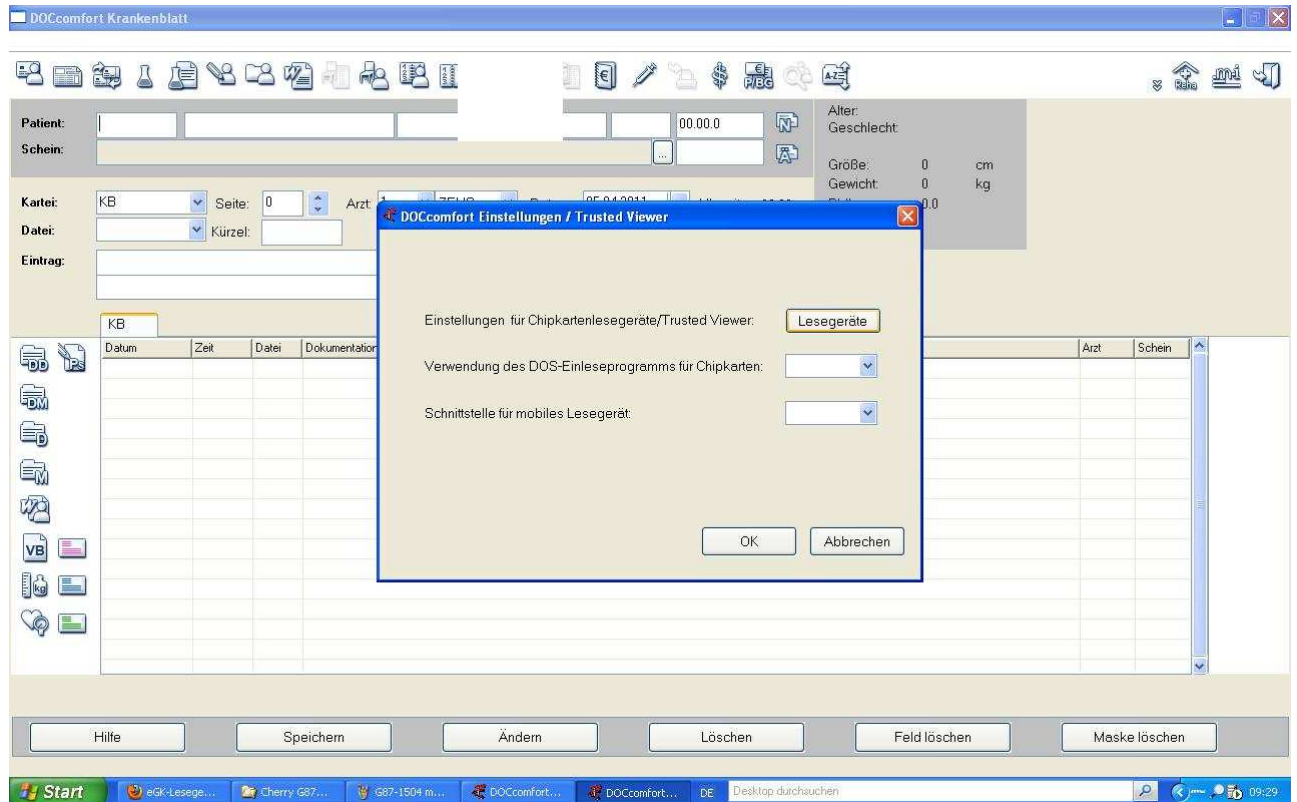


Markieren Sie im Feld „Hersteller Smartcard Leser“ Cherry ST-1503/ eHealth G87-1504 und markieren Sie die Angabe **USB** und bestätigen Sie mit **ok**

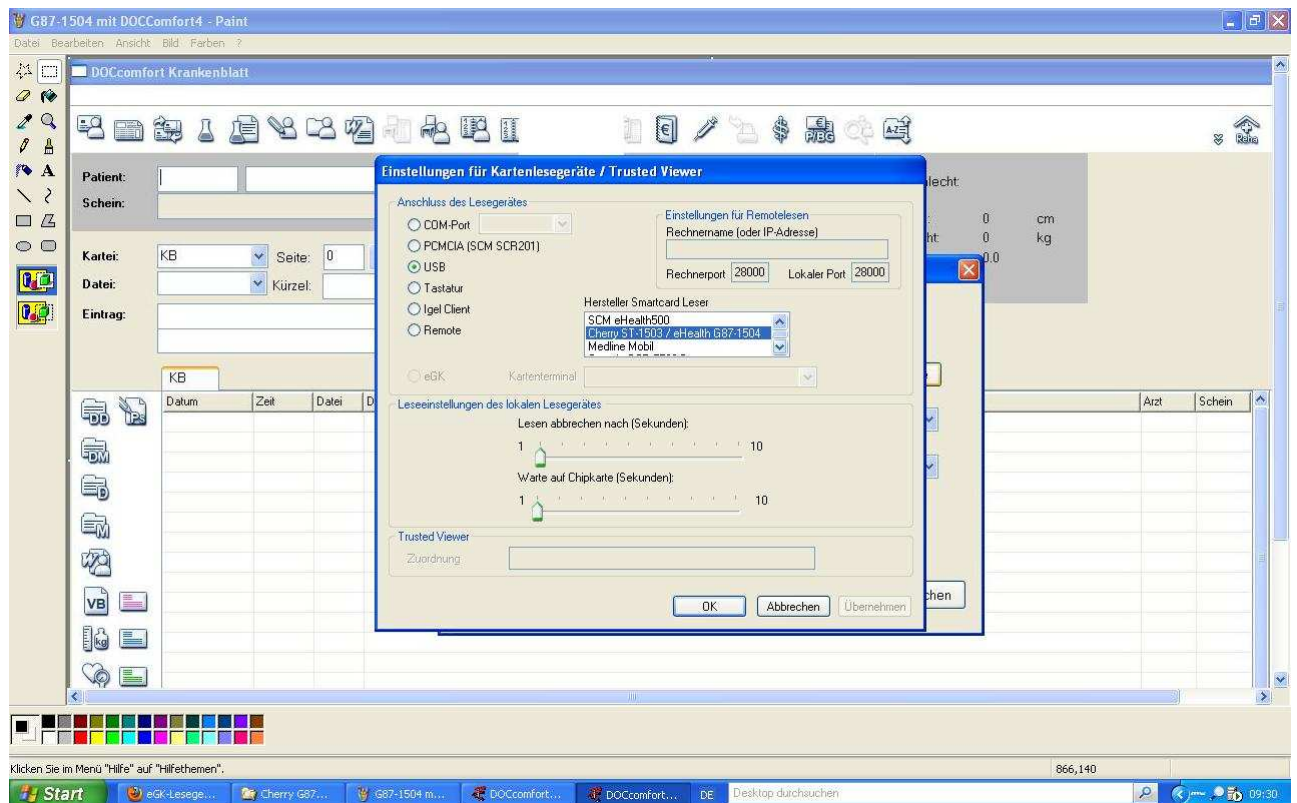


Klicken Sie auf **ok**

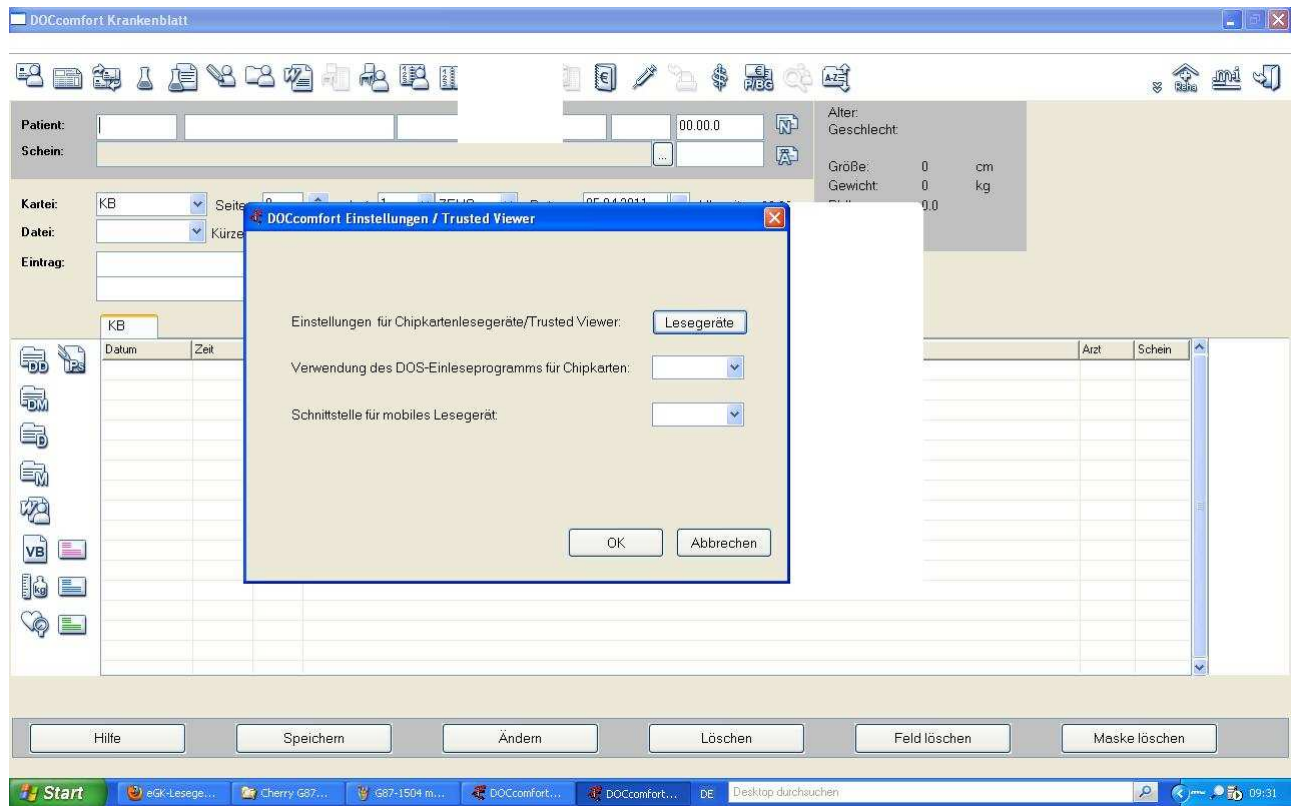

Stecken Sie eine Versichertenkarte in den Kartenslot der Tastatur und lesen Sie über die gewohnte Schaltfläche ein.

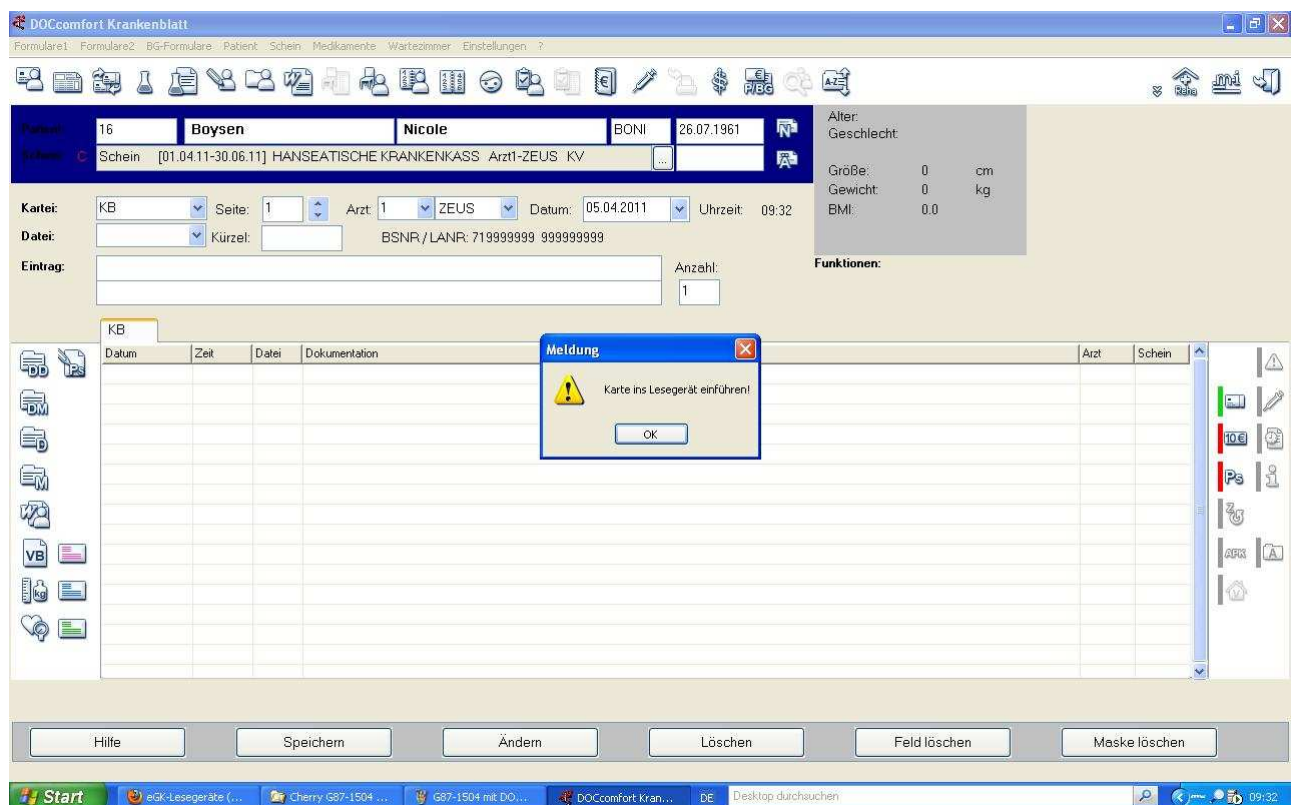

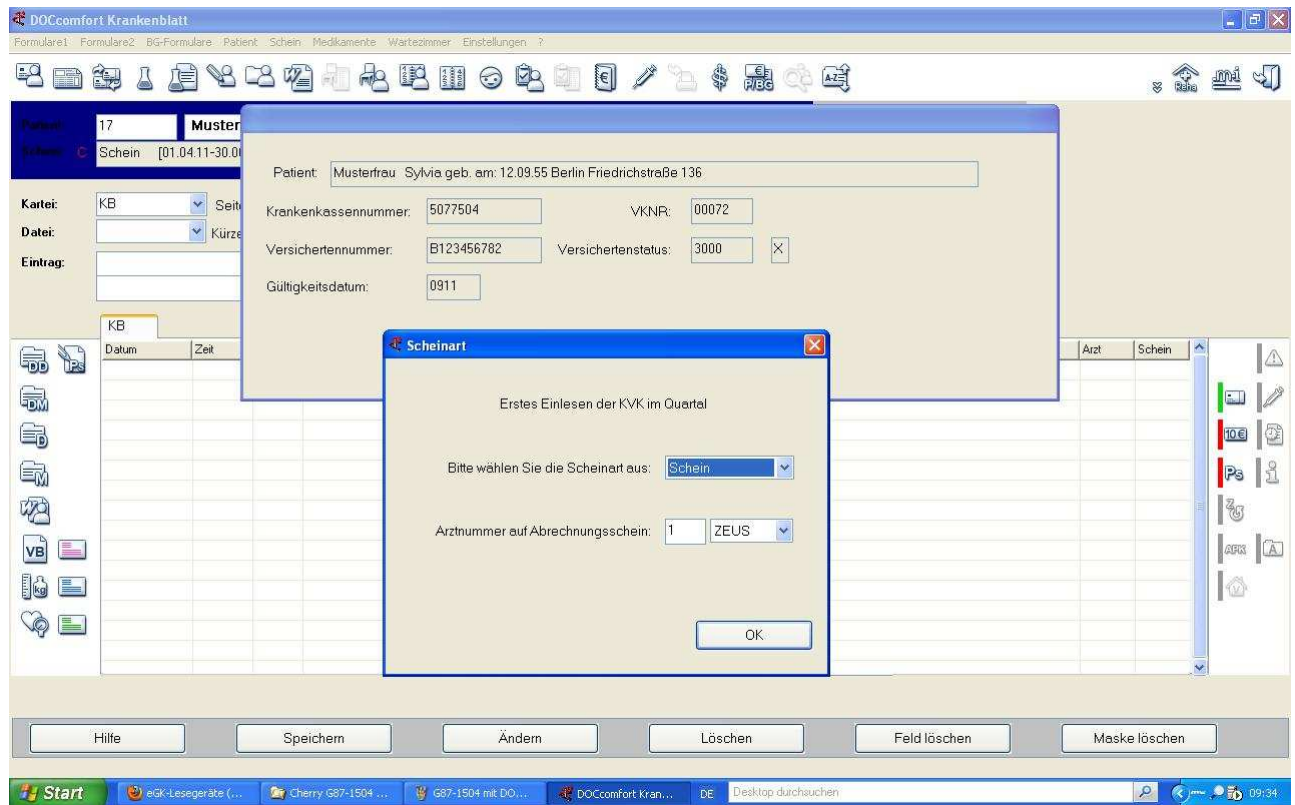

Die Krankenversichertenkarte/Gesundheitskarte wurde erfolgreich in DOCComfort eingelesen

Hamburg, 5.4.2011
Via da Vinci.dialog GmbH
Service
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Tel. 040/ 84 87 87 87
www.ehealth-bcs-terminals.de
www.ehealth-terminals.de