



Installation des Terminals ORGA 6041/ Hersteller Ingenico Healthcare


Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-Rom Laufwerk Ihres PC's und wählen Sie die gewünschte Sprache

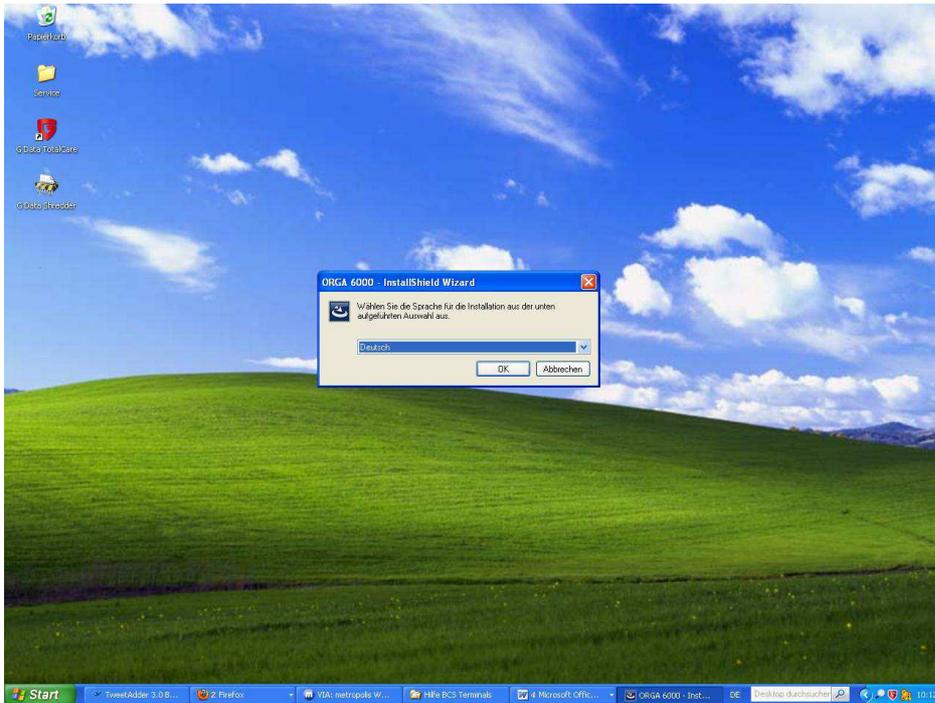


Klicken Sie auf *Weiter*

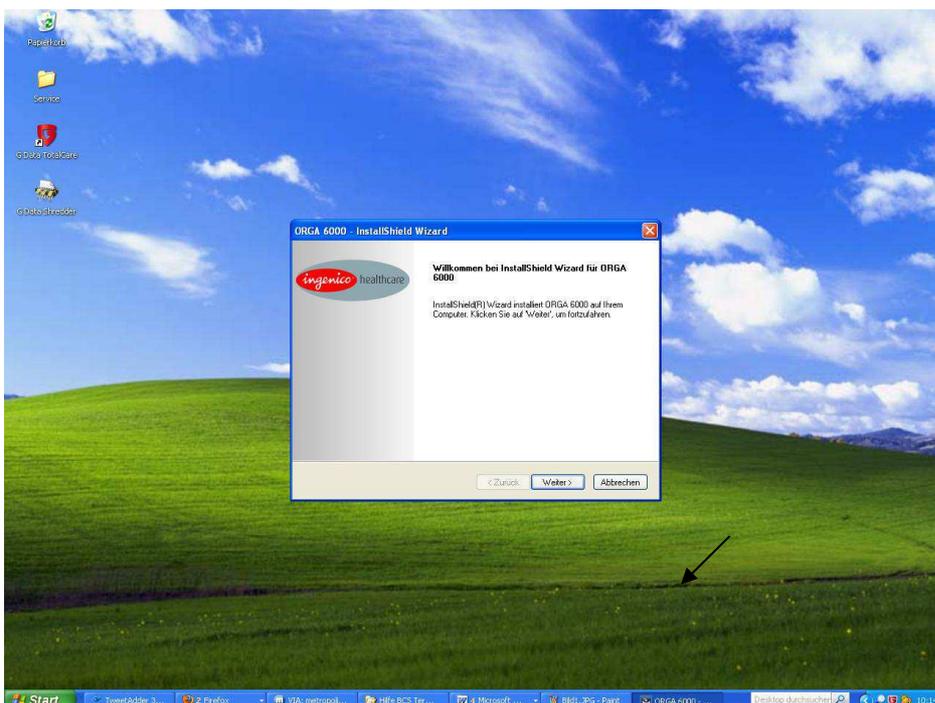


Wählen Sie den Zielort für die Installation aus (Standard Festplatte)

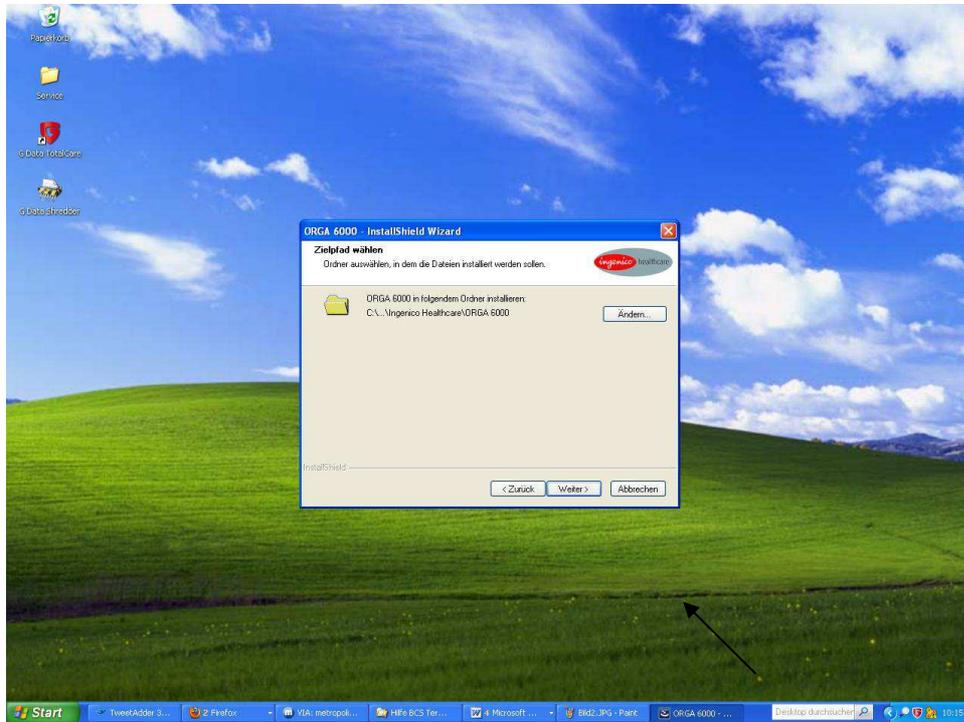


Klicken Sie hier auf *Installieren*

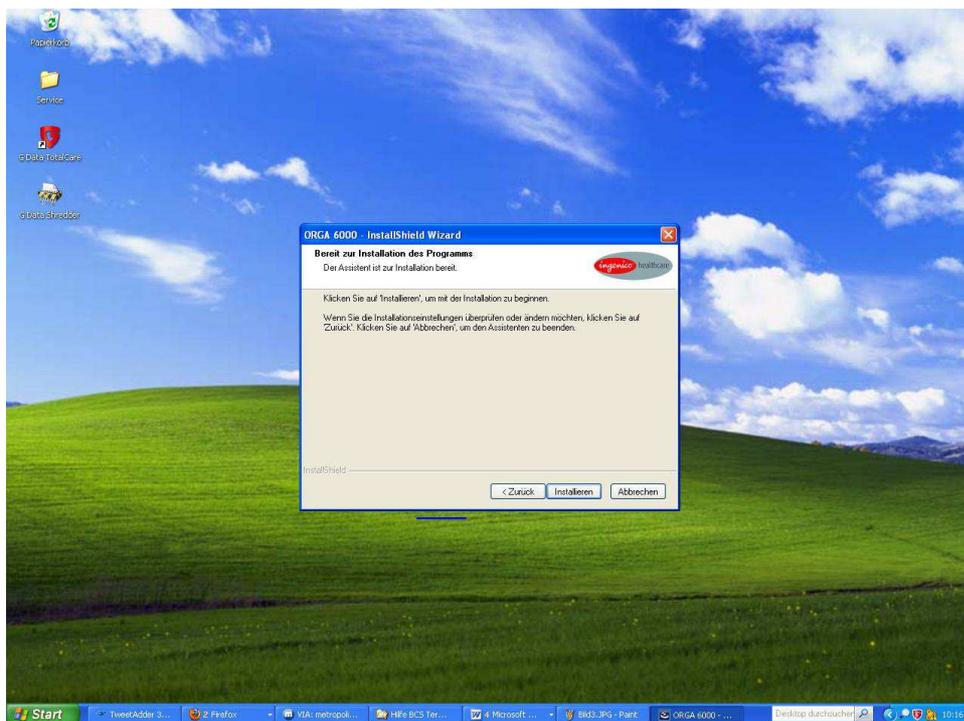


Klicken Sie auf *Weiter*

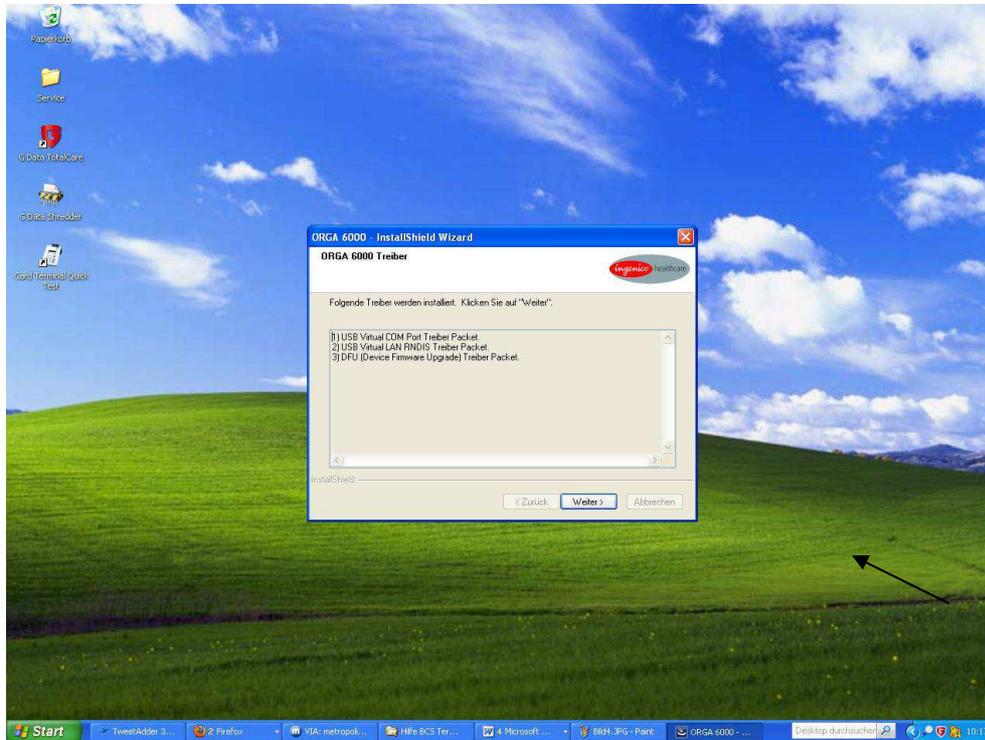


Klicken Sie anschließend auf *Fertig stellen*.

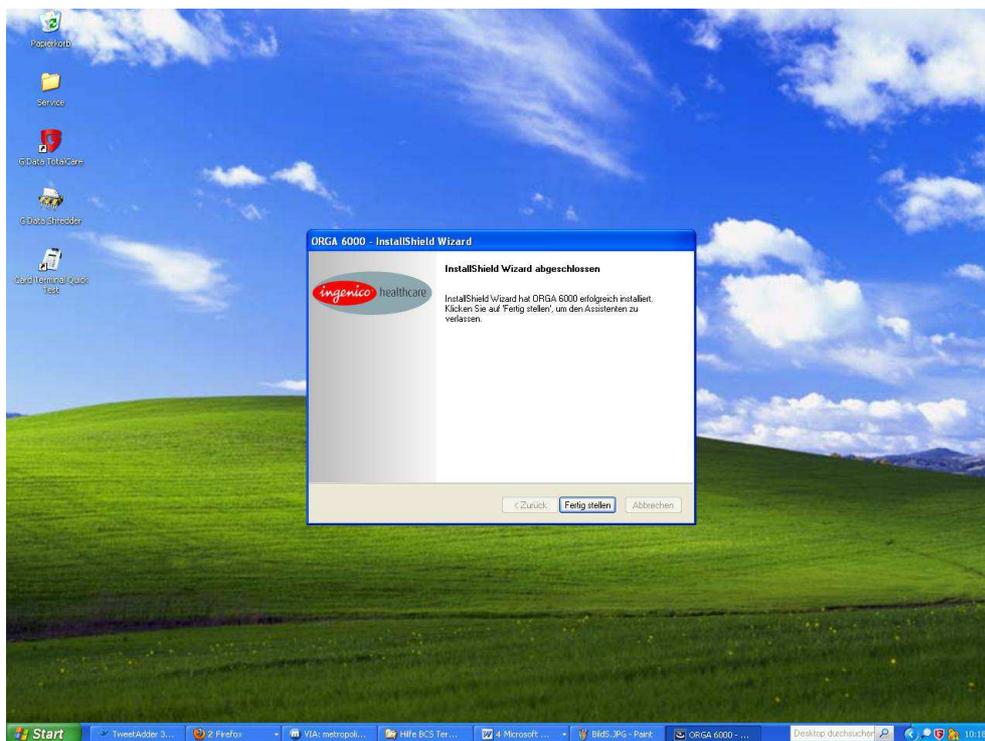


Schließen Sie das eHealth-Terminal ORGA 6041 L eGK mit dem Netzteil ans Stromnetz an und schalten Sie es ein. Geben Sie eine beliebige 8-stellige Pin-Nummer ein und wiederholen Sie die Eingabe gemäß Aufforderung. Verbinden Sie anschließend das Terminal über das USB-Kabel mit dem PC. (**Wichtig: PIN-Nummer nicht verlieren**)

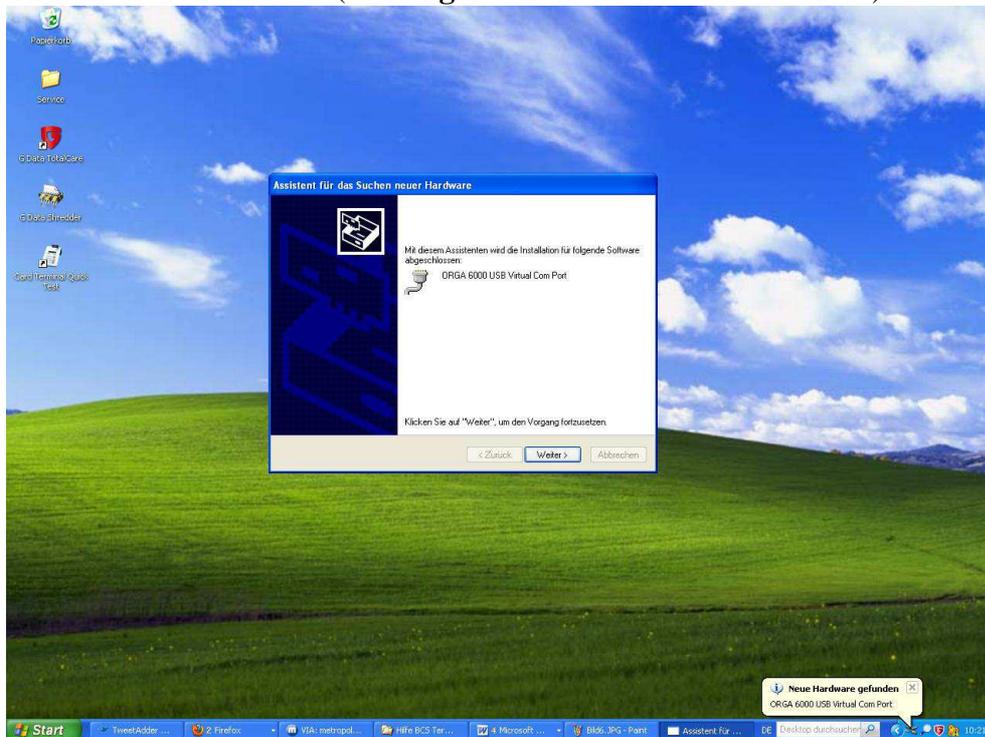


Bitte notieren Sie sich die angezeigte COM-Port Nummer:

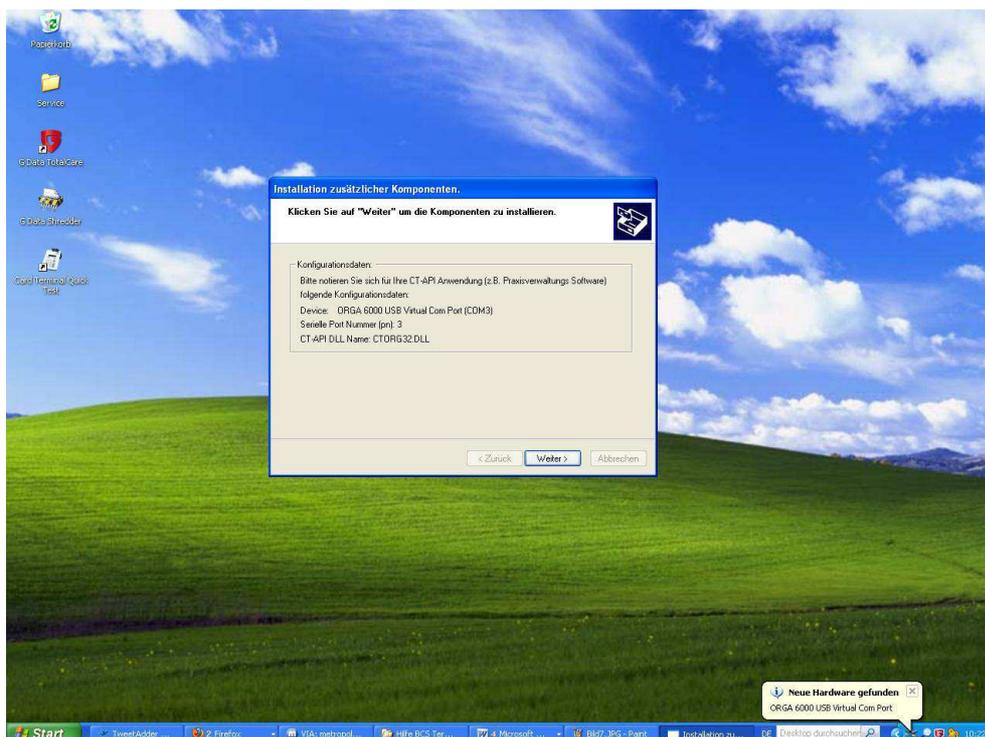


Klicken Sie auf *Fertig stellen*

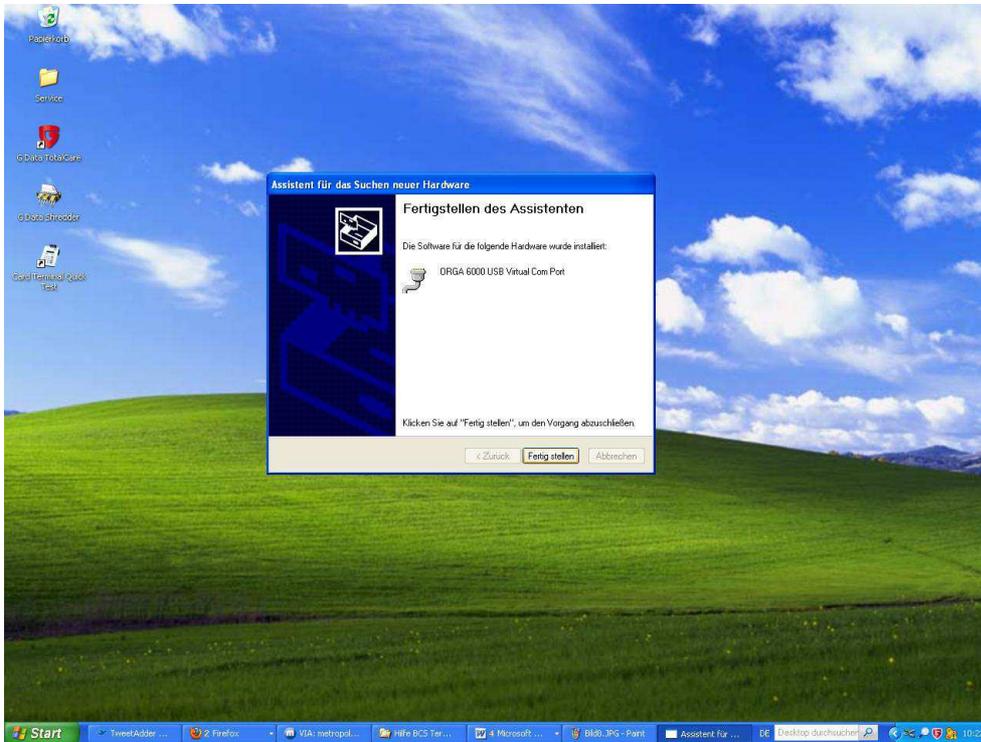


Das Terminal ORGA 6041 L eGK ist nun installiert. Starten Sie nun die Testsoftware WinHML-Test unter Windows/ Alle Programme/ Ingenico Healthcare

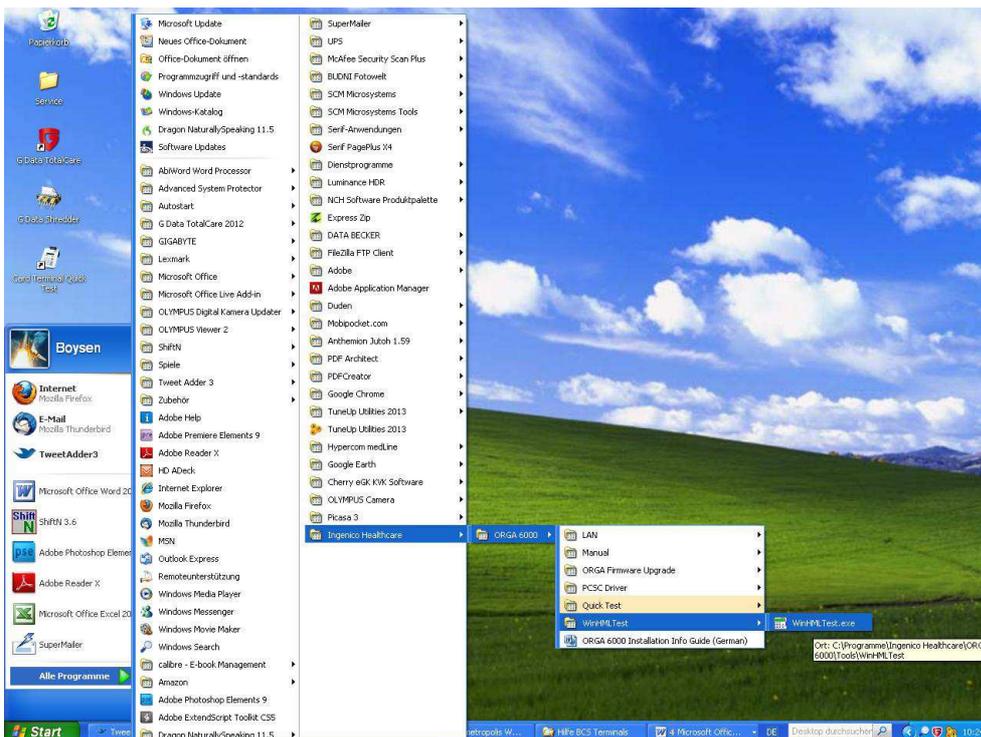


Klicken Sie hier auf **OK**

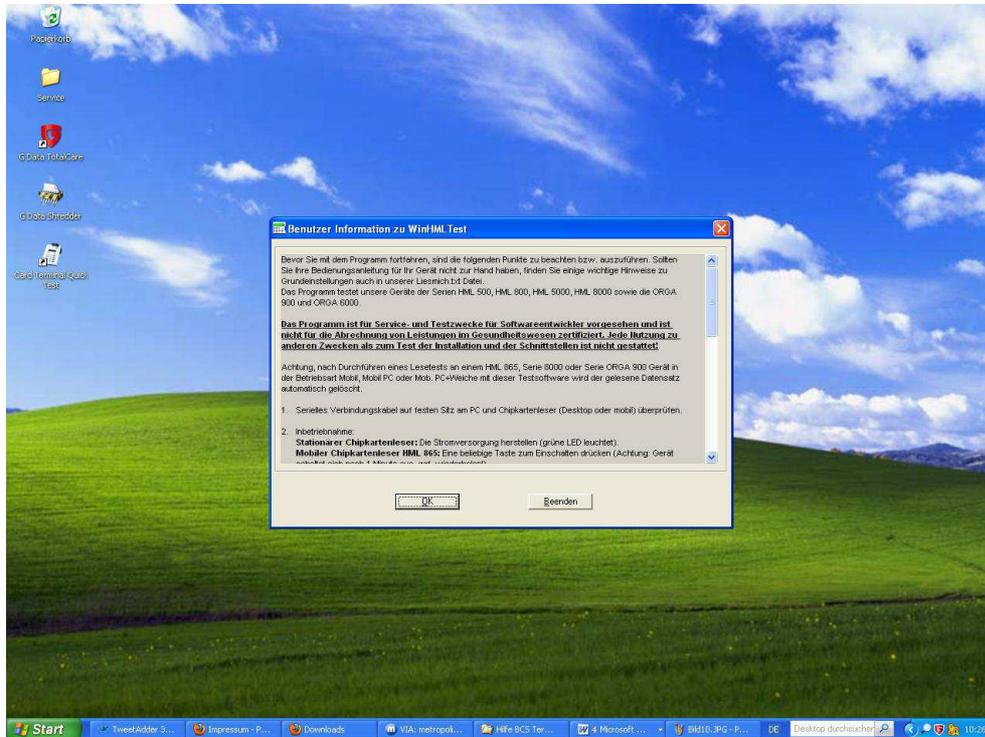

Stecken Sie eine Versichertenkarte in den Kartenslot oberhalb des Terminal-Displays.

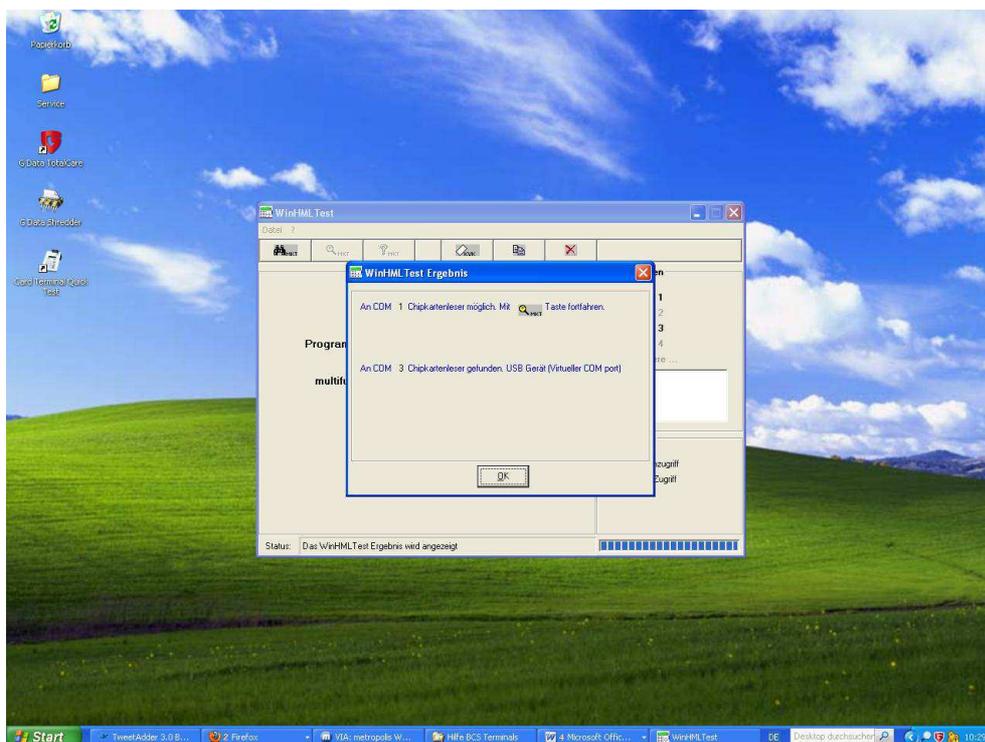

Die Kartendaten und der zugeordnete COM Port werden angezeigt.

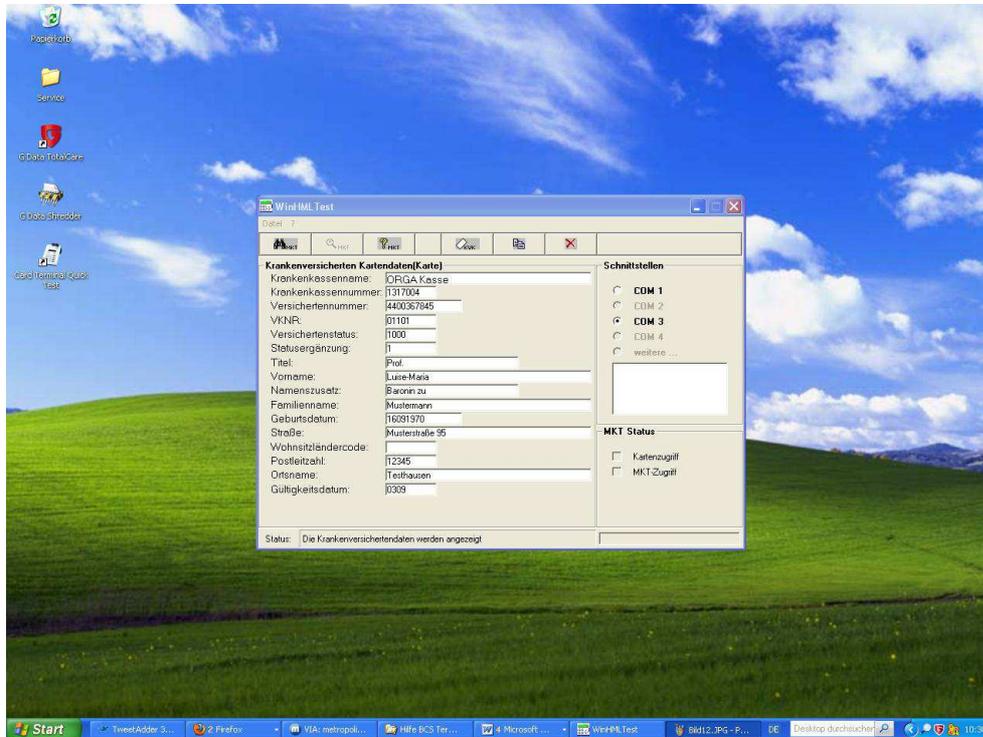

Beenden Sie das Testprogramm mit X. Nun ist das ORGA 6041 L eGK bereit für den Betrieb mit dem Praxisprogramm. Geben Sie dort in den Einstellungen für den Kartenleser den während der Installation angezeigten COM-Port ein.

VIA DA VINCI.dialog GmbH
Service

21. Februar 2013

