

eHealth-Terminals/ Service

Direktausdruck von Versichertendaten

Direktausdruck von Versichertendaten vom mobilen Lesegerät **CardStar/memo3** über die Dockingstation des **CARD STAR/medic2** am **Epson Drucker LQ300+II**



Für den Direktausdruck von Versichertendaten der elektronischen Gesundheitskarte kann das CARD STAR/medic2 mit dem Epson-Drucker über die serielle Druckerschnittstelle verbunden werden.

Als **Kabelverbindung** ist das im Lieferumfang des Lesegerätes enthaltene **serielle PC-Anschlusskabel** und ein **Adapter 9/25 Pol** zu verwenden.

Für den Ausdruck der Versichertendaten ist wie folgt vorzugehen:

1. Drucker und CARD STAR/medic2 einschalten
2. Papier in den Drucker einziehen lassen
3. Das mobile Karten-Lesegerät CARD STAR/memo3 in die Dockingstation des stationären Terminals CARD STAR/medic2 einsetzen



Anzeige im Display: memo bereit

VIA DA VINCIdialog GmbH

Hellgrundweg 109 * 22525 Hamburg * PHONE 040/8487870 * FAX 040/847808 * email: gesundheitswesen@viadavinci.de
HR Hamburg 60120 * GESCHÄFTSFÜHRUNG Nicole Boysen * ST-Nr. 0289100342 * UST-IDNR. DE 175965265

4. Drücken Sie am CARD STAR/medic2 zuerst die Taste **F** und anschließend die Taste **4**




Taste F: Funktionsanwahl




Taste 4: anzeigen

5. Bestätigen Sie dies mit Drücken der grünen Taste des medic2, der Patientennamen erscheint

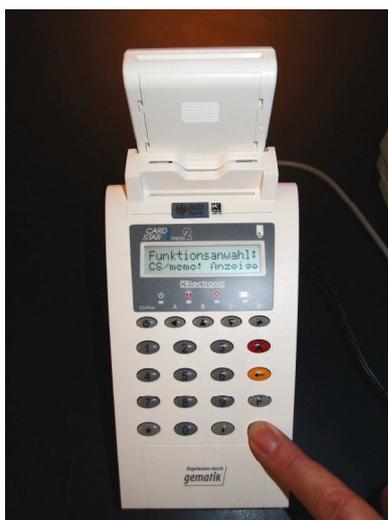

Bestätigung

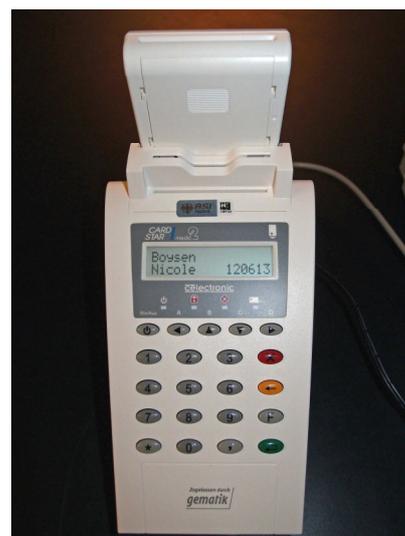

Patient

5. Bestätigen Sie **nochmals** mit der grünen Taste, der Familienname wird angezeigt und anschließend die Taste * (Stern)



Anzeige Familienname



Taste * drücken

6. Auf dem Display erscheint: „Druckausgabe starten?“ Dies bestätigen Sie wieder mit der grünen Taste



Druckausgabe starten?



Bestätigen

Die Druckausgabe beginnt nun.

VIA DA VINCI.dialog GmbH
Abt. Service